



Therap. Ref 1 003

Manual de instrucciones
Instruction manual
Mode d'emploi
Bedenungsanleitung
Manuale d'istruzioni

Lámpara
infrarrojos
Heating Lamp
Lampe à
infrarouges
Infrarotlampe
Lampada a
infrarossi

Advertencia	Warnung
- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado. - No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de baño, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes electrónicos de su equipo. - Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños. - Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor. Advertissement - N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contact votre fournisseur ou un technicien qualifié. - N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil. - N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil. - Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur. Avvertenza - Non aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchio. Qualora fosse necessaria un'ispezione, contattate il fornitore o un tecnico specializzato. - Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, quali zone di acqua, bagni, ecc. in modo da prevenire danni alle componenti elettriche. - Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero causare danni. - Qualora il cavo elettrico fosse roto, chieda al suo distributore di fornire un altro per evitare eventuali rischi.	- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician. - Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit. - Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage. - If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service. Warnung - Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung. - Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schäden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden. - Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen. - Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

Declaración de conformidad CE	EC-Declaration of compliance
Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas: 1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU. 2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU.	This product meets the following requirements: 1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU. 2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU.
Déclaration de conformité CE	EC Konformitätserklärung
Ce produit répond aux exigences suivantes: 1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU. 2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU.	Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen: 1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU. 2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU.

Dichiarazione di conformità CE
Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive: 1. Le misure della Direttiva sulla "bassa tensione": 2014/35/EU. 2. Le misure della Direttiva sulla "compatibilità elettromagnetica": 2014/30/EU.


Reciclaje	Recycling
Quando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.	Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.
Recyclage	Recycling
Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.	Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

Riciclaggio	
Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.	
¡Bienvenido!	Welcome!
Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto. La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.	Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation. The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.
Bienvenue!	Willkommen!
Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation. L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.	Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen. Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.
Bienvenuti!	
Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto. L'Azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scrivere un'e-mail affinché possiamo correggerli.	

Instrucciones de uso	Instructions of use
1. Monte la base de acuerdo con el esquema mostrado a continuación: 2. Coloque la lámpara en la base. 3. Encienda el interruptor. 4. Encienda el interruptor que se utiliza para controlar la intensidad de la luz (el dorado), ajustarlo a la intensidad apropiada para el cliente. 5. Después del tratamiento, primero ajuste la intensidad, con el interruptor de control al mínimo, y luego apague el interruptor rojo.	1. Assemble the base according to the sketch shown below: 2. Insert the lamp into the base. 3. Turn on the switch. 4. Turn on the switch that is used to control the light intensity (the golden one) and adjust it to the proper intensity for the customer. 5. After the treatment, first adjust down the intensity, control switch to minimum, then switch off the red switch.

Mode d'emploi	Gebruachs
1. Assemblez la base selon le schéma ci-dessous: 2. Insérez la lampe dans la base. 3. Tournez l'interrupteur. 4. Tournez l'interrupteur qui est utilisé pour contrôler l'intensité de la lumière (doré) et réglez l'intensité appropriée pour le client. 5. Après le traitement, réglez d'abord le bas de l'intensité, interrupteur de contrôle au minimum, et puis éteignez l'interrupteur rouge.	1. Montieren Sie das Basisselement wie in der Abbildung unten angezeigt. 2. Setzen Sie die Lampe in das Basisselement ein. 3. Drücken Sie auf den Schalter. 4. Schalten Sie den Schalter ein, der die Lichtintensität reguliert (goldener Schalter), stellen Sie die richtige Lichtintensität für den Kunden ein. 5. Nach dem Betrieb, stellen Sie zunächst einmal den Lichtintensitätsschalter auf das Minimum und schalten dann den roten Schalter aus.

Istruzioni d'uso
1. Montare lo stativo seguendo lo schema sottostante. 2. Collocare la lampada sullo stativo. 3. Attaccare la spina alla presa. 4. Accendere la lampada mediante l'interruttore. 5. Regolare l'intensità della luce a infrarossi mediante la manopola giratoria. 6. Regolare la distanza tra la lampada e la pelle del paziente per il trattamento. 7. Dopo il trattamento abbassare al minimo l'intensità per poi spegnere la lampada tramite l'interruttore.

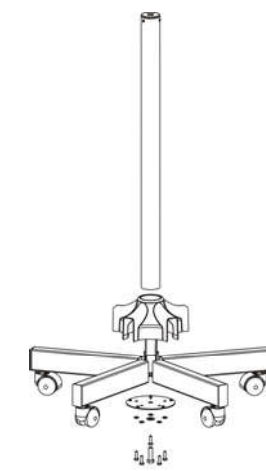

FICHA TÉCNICA		
Pesos y l amañs	Tamaño embalaje (cm)	77x30x24
	Peso bruto (Kg)	9
	Peso neto(Kg)	7,8
Características eléctricas	Voltaje nominal	220 V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	275 W

TECHNICAL SHEET		
Weights and sizes	Packing size (cm)	77x30x24
	Gross weight (kg)	9
	Net weight (kg)	7,8
Electrical characteristics	Rated voltage	220 V ~ 240V
	Frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	275 W


SPÉCIFICATIONS		
Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	77x30x24
	Poids brut (kg)	9
	Poids net (kg)	7,8
Caractéristiques élec triques	Tension nominale	220 V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	275 W

Precaución	Cautions
No toque la bombilla durante el tratamiento o después de la media hora para evitar quemaduras.	Do not touch the bulb during the treatment or after within half an hour to avoid scalds.
Cautions	Vorsicht
Ne touchez pas l'ampoule pendant le traitement ou après une demi-heure de ceci pour éviter les brûlures.	Fassen Sie die Glühlampe während des Betriebes oder bis zu einer halben Stunde nach Betrieb nicht an um Verbrennungen zu vermeiden.
Precauzioni	
Durante il trattamento e mezz'ora dopo aver spento la lampada non toccare la lampadina onde evitare ustioni.	

Mantenimiento	Maintenance
Cuide bien la lámpara y límpiela con frecuencia. No utilice la lámpara con un voltaje inestable.	Take good care of the bulb and clean it frequently. Do not use the lamp under unstable voltage.
Maintenance	Wartung
Prenez bien soin de l'ampoule et nettoyez-la fréquemment. Ne pas utiliser la lampe sous une tension instable.	Achten Sie auf eine gute Pflege der Glühlampe und reinigen Sie sie regelmäßig. Lampe unter instabilen Stromverhältnissen nicht verwenden.
	Mantenimento
	Pulire la lampada con frequenza. Non utilizzare la lampada se la tensione nominale non è stabile.

TECHNISCHEDATEN		
Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	77x30x24
	Bruttogewicht (kg)	9
	Nettogewicht (kg)	7,8
Elektrische Daten	Nennspannung	220 V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	275 W

SCHEDA TECNICA		
Pesi e dimensioni	Dimensioni imballo (cm)	77x30x24
	Peso lordo (kg)	9
	Peso netto (Kg)	7,8
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	220 V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	275 W

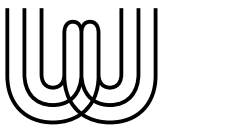

weelko
the wellness
company

Importador/Importer
Importateur/Importeur
Importatore:

Weelko Barcelona, S.L.
ES865397556

Barcelona
Pol. Ind. La Vallada
Cami de Ca metà, 92
08006 Re iça
Barcelona - Spain
T: +34 938 24 00 20
E: info@weelko.com
W: www.weelko.com