



Suma Med Alu Pur-Eco

L10

Detergente para el lavado automático de Instrumental Sanitario

Descripción

Suma Med Alu Pur-Eco es un detergente líquido concentrado especialmente formulado para utilizar en un amplio rango de máquinas de ultrasonido y lavadoras-desinfectadoras para el lavado automático de Instrumental Sanitario.

Propiedades

Suma Med Alu Pur-Eco es un detergente líquido especialmente formulado para utilizar en un amplio rango de máquinas de ultrasonidos y máquinas de lavadodesinfección para laboratorios y limpieza de instrumental quirúrgico. Especialmente formulado para utilizar con metales blandos como aluminio, cobre o plata.

Beneficios

- Aplicación segura en aluminio y otros materiales suaves
- Contiene emulsionantes de gran poder y agentes dispersantes para la eliminación de suciedad proteínica
- Adecuado para utilizar en condiciones de aguas medias-duras
- Fórmula concentrada proporciona un gran ahorro de costes
- Certificación EU Ecolabel

Modo de empleo

Suma Med Alu Pur-Eco normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática de Diversey. También puede usarse con los equipos de dosificación de la propia máquina. Cuando se utilice por primera vez, aclarar la bomba dosificadora y los tubos para evitar una posible cristalización causada por la mezcla de productos. Seque el instrumental sanitario antes de utilizarlo. Además, los productos sanitarios deben esterilizarse más si son invasivos. Se requieren guantes especiales y gafas de seguridad o gafas protectoras en condiciones normales de uso.

Aplicación

Suma Med Alu Pur-Eco es un detergente líquido concentrado especialmente formulado para su uso en una amplia gama de máquinas ultrasónicas y lavadoras desinfectadoras. Especialmente formulado para su uso en metales blandos como aluminio, cobre o plata. Compatible con acero inoxidable. El producto está destinado a un solo uso.

Usuarios previstos

Personal cualificado autorizado de un centro sanitario. Sólo para uso profesional.

Dosificación*

Para asegurar unos resultados de limpieza perfectos, dosificar a una concentración de 1-2ml/L, dependiendo de las condiciones locales del agua.


**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



EU Ecolabel: SE/038/001



Diversey Europe
Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands

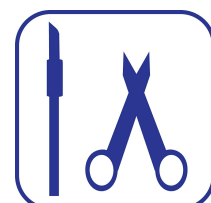

The Diversey logo features the brand name "Diversey" in a white serif font, with a stylized leaf icon to its right. The entire logo is set against a dark blue oval background. A small "TM" trademark symbol is located at the top right of the oval.

Diversey

Suma Med Alu Pur-Eco

L10

Información técnica

Apariencia:	Líquido transparente incoloro
pH (producto puro):	> 11.5
pH (en uso):	> 11 (0.4 %)
Densidad Relativa (20°C):	≈ 1.27

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Manipular siguiendo buenas prácticas de seguridad e higiene industrial. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. No mezclar con otros productos a menos que Diversey lo aconseje. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. El producto no está destinado a ser reprocesado. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Atención

Temperaturas de almacenamiento 0-40 °C. En caso de producirse cualquier incidente grave en relación con el uso de Suma Med Alu Pur-Eco, el usuario deberá comunicarlo a la oficina local de Diversey y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente. No reutilizar. El producto no está destinado al uso en la piel humana. Suma Med Alu Pur-Eco no está destinado a ser utilizado en productos sanitarios porosos o sensibles a los álcalis, excepto el aluminio. No utilizar en productos sanitarios fabricados con tereftalato de polietileno (PET). Sin la esterilización adecuada, el producto no está diseñado para su uso en dispositivos médicos invasivos que penetran en el tejido o invaden el torrente sanguíneo ni entra en contacto directo con membranas mucosas intactas. No utilice Suma Med Alu Pur-Eco en productos sanitarios de plástico. No se recomiendan usos distintos de los indicados. Lavarse las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral. Lávese bien la cara, las manos y la piel expuesta después de la manipulación. Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Utilizar el equipo de protección individual necesario. Utilizar sólo con ventilación adecuada. Suma Med Alu Pur-Eco contiene metasilicato disódico (Metasilicato de Sodio) y puede causar: Irritación cutánea, Lesiones oculares graves. Consejos de prudencia: Llevar gafas o máscara de protección. Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Consideraciones relativas a la eliminación

El contenido concentrado o envase contaminado debe eliminarse a través de un gestor autorizado. Se desaconseja eliminar el residuo en el alcantarillado. El envase limpio es adecuado para recuperación de energía o reciclaje de acuerdo con la legislación local.

Catálogo de Desechos Europeos: 20 01 29* - detergentes que contienen sustancias peligrosas.

Envase vacío Recomendación: Eliminar según normativa vigente.

Agentes de limpieza adecuados: Agua, si es necesario con agente limpiador.

Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, Suma Med Alu Pur-Eco es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes utilizados para instrumentos médicos los cuales pueden ser lavados en lavadorasdesinfectadoras.

Información medioambiental

Suma Med Alu Pur-Eco obtuvo la licencia SE/038/001 por cumplir los criterios de la etiqueta ecológica de la UE como producto respetuoso con el medio ambiente.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 25/07/2024 es-ES (K02319)