EN

SILVERFOX

2296 Series Facial Chair

Welcome to use our product.
The manufacturer reserves the right to improve design and modify the product without prior notice.
Version A0

1. About This Manual

This manual is for reference only when operating this specific model. If the manual is used for other purposes, we will not undertake any resulting consequences or responsibilities.
All information of this manual shall be protected by copyright and shall not be copied and translated in any part of this specification without the written consent of our company SILVERFOX.

2. Warning

Electrical Hazards

- The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and with protective earth, to prevent the risk of fire and electric shock.
- The ground wire in the power cord serves only as a functional ground.
- Do not place the device in a location where it is difficult to disconnect the power supply.
- The power supply must be cut off when replacing electrical components or cleaning the equipment.
- Do not place the device in humid places such as bathrooms to avoid electric shock or other malfunctions; keep the hand remote controller and control box away from water.
- If the plug is damaged, please contact the dealer, service center or relevant personnel with relevant skills and experience for repair to avoid danger.

Mechanical Risk

- Do not stand on this equipment.
- Do not allow children to operate or play with and place with the equipment or place it within their reach.
- The maximum load capacity of this chair is 200 kg. Exceeding the load capacity may cause safety risks.

Environmental Controls

- Please do not place and operate the equipment in places where is painting/coating or supplying oxygen.
- Electric shock protection: Class I
- For indoor use only

Operational Protocol

- After usage, please stay the upholstery flat to 180°.
- This equipment should be operated by trained personnel who are familiar with its structure, performance, and operating instructions, and who should perform regular maintenance.
- This equipment shall not be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities without adequate experience or knowledge, unless they are under continuous supervision or have received instructions regarding safe operation by a qualified person responsible for their safety."
  WARNING: During equipment operation, verify that the range of motion is clear of obstacles to prevent crushing or entanglement hazards.

Disposal & Modification

- Any modifications to this device are not permitted.
- The equipment and accessories must be disposed of according to local regulations after their service life ends.

3. Precautions


Maintenance Protocol

- Do not repair or maintain this device during treatment operations.
- If the user and/or patient becomes aware of any serious incident associated with this equipment, it should be reported to the regulatory authorities in the user/patient's country and to the manufacturer.
- Regularly tighten bolts and nuts to prevent malfunctions caused by loose components, slippage, vibration, and falling.
- During maintenance, operators must not disassemble any components of the chair.
- Do not operate this product if it malfunctions. If any abnormal phenomenon or sound is detected, immediately stop operation and inspect it. Operation can only be resumed after the malfunction is corrected.
- Maintenance should be performed by trained professionals.

- After each treatment, use a neutral solution to remove dust and stains from the leather.
- Replacements must be performed by trained professionals. Our company can provide circuit diagrams, troubleshooting guides, or other helpful maintenance materials for professional reference.


Operational Protocol

- Please read this manual carefully before installation, operation, and adjustment, and keep it in a safe place.
- Observe safety operating procedures, do not overload the table, ensure that all safety devices are complete and reliable, and promptly eliminate any unsafe conditions.
- Operate the product in strict accordance with the warning labels attached to the product. To control the entire chair's lift, the button must be pressed continuously until the chair is in the desired position.
- Avoid single-point load operations. (distribute weight evenly)
- Motor duty cycle: ≤2minutes ON / ≥18minutes OFF. (the motor is designed to operate for a maximum of 2 minutes, followed by a minimum of 18 minutes of rest)
- When adjusting each component, keep your hands, feet, and head away from the arrow points that shown in below picture.

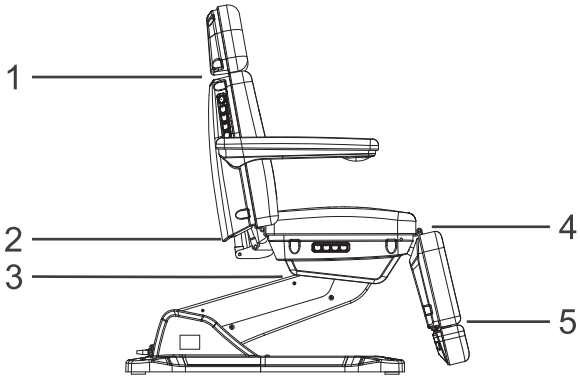

4. Installation

- Unpack the box and inspect the product to ensure it is in good condition and that all accessories and spare parts are present. If you have any questions, please contact your dealer.
- Place the product in a dry, clean, treatment-friendly area of the room, leaving ample space around the device for operation. Ensure the floor is level. If the floor is uneven, rotate the rubber feet to compensate for any unevenness to ensure stability.
- Note: No additional screws are required to secure the table to the floor.
- Connect the product plug to the power source properly (as shown in the image).

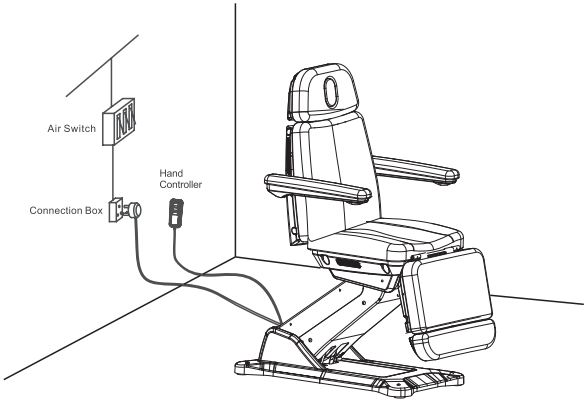

5. Structure of products


This device consists of a control box, motor, hardware, plastic components, and leather.

Function description


Electrically operated beauty bed, powered by an internal motorized system for precise and adjustable positioning. Designed to provide stable support for clients during various skincare and beauty treatments.

Circuit System Diagram

2296

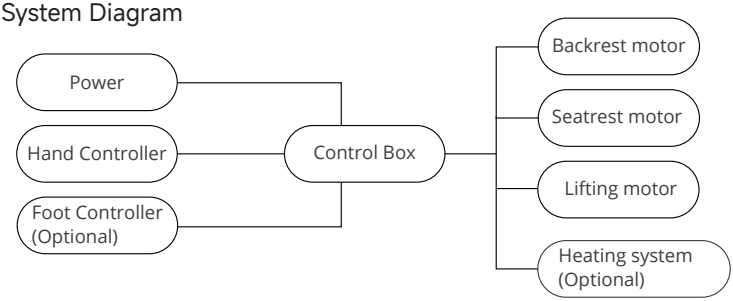


2296B
2296B PRO

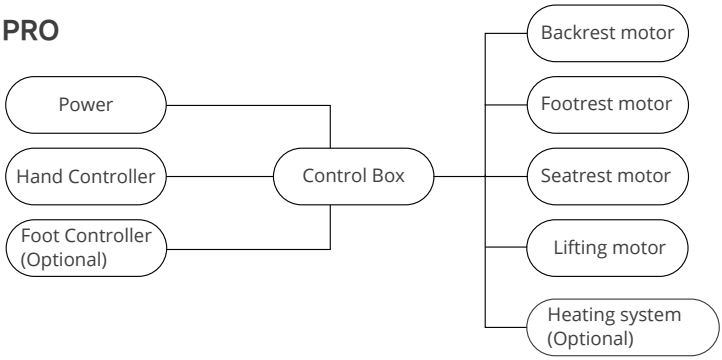

The control box


Depending on the model, this device includes backrest angle adjustment, seat cushion angle adjustment, and lift adjustment. It is an overall integral structure. (As shown in picture)

2296

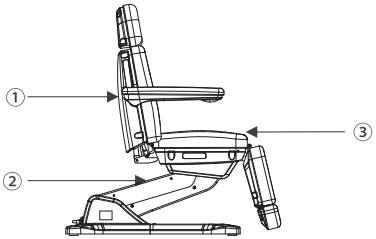

① angle adjustment of the backrest
② lifting adjustment
③ angle adjustment of the seat
④ angle adjustment of the footrest (Manual adjustment)

2296B / 2296B PRO

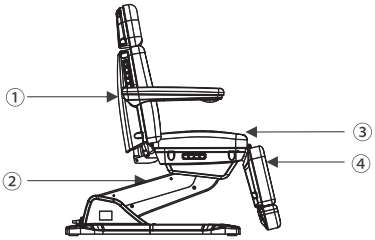


① angle adjustment of the backrest
② lifting adjustment
③ angle adjustment of the seat
④ angle adjustment of the footrest


6. Operation Instruction

2296


1.Standard Configuration
(Hand Controller)

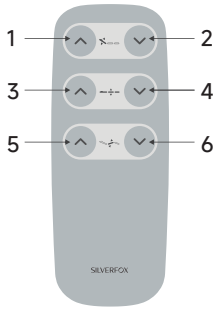

2.Optional Configuration
(Hand Controller)

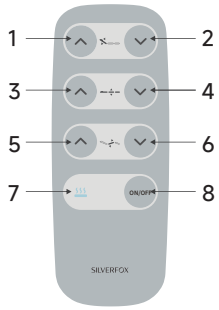


3. Optional Configuration
(Foot Controller)

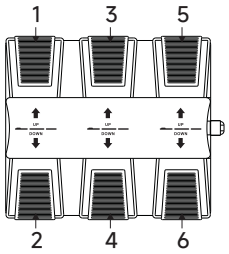


No.	Description	Operation
1/2	Backrest UP or DOWN	Press and hold the appropriate button to move the chair Movement stops when… Button is released Maximum / minimum position is reached.
3/4	Chair Lift UP or DOWN	
5/6	Tilt UP or DOWN	
7	Indicator light of heating function	Pressing the button, the light is on, the heating function works; pressing the button again, the light is off, the heating function stops working.
8	Heating button(Optional)	

2296B


1.Standard Configuration
(Hand Controller)

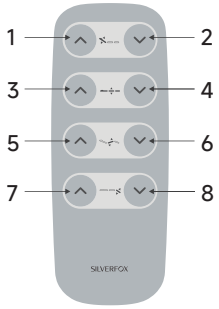

2.Optional Configuration
(Hand Controller)

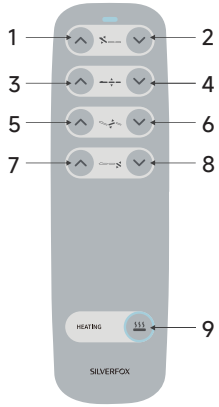


3. Optional Configuration
(Foot Controller)

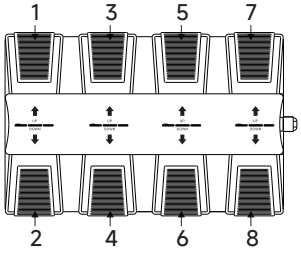


No.	Description	Operation
1/2	Backrest UP or DOWN	Press and hold the appropriate button to move the chair Movement stops when… Button is released Maximum / minimum position is reached.
3/4	Chair Lift UP or DOWN	
5/6	Tilt UP or DOWN	
7/8	Foot UP or DOWN	
9	Heating button (Optional)	Pressing the button, the light is on, the heating function works; pressing the button again, the light is off, the heating function stops working.

2296B PRO


1.Standard Configuration
(Hand Controller)

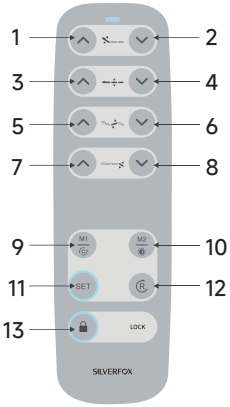



2.Optional Configuration
(Hand Controller)

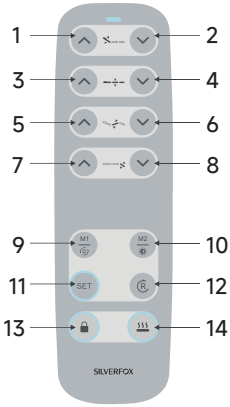

3. Optional Configuration
(Foot Controller)

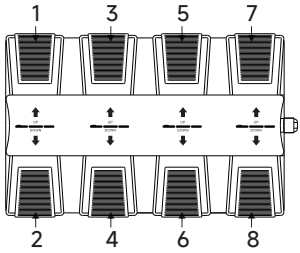

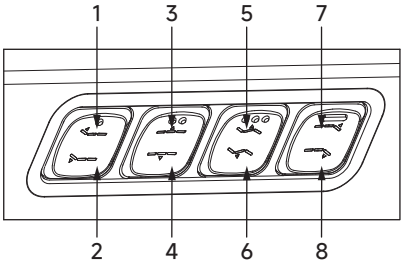

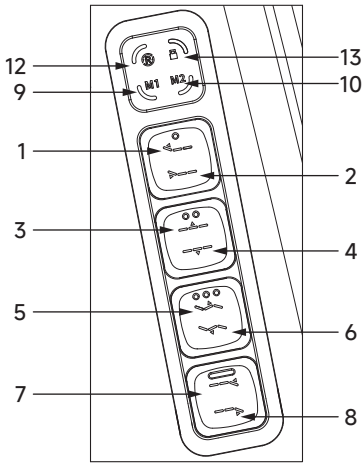

No.	Description	Operation
1/2	Backrest UP or DOWN	Press and hold the appropriate button to move the chair Movement stops when… Button is released Maximum / minimum position is reached.
3/4	Chair Lift UP or DOWN	
5/6	Tilt UP or DOWN	
7/8	Foot UP or DOWN	
9/10 Upper Section	 Memory Function Programming the chair positions	The Programming feature allows you to easily recall two frequently used chair positions with M1, M2 buttons. -Adjust the chair to the desired position -Press and hold the "M1" or "M2" button (on the backrest button or the hand remote control) for 3 seconds. You will hear a beep and the position will be set to "M1" or "M2". To recall a programmed position… -Press the desire position button “M1” or “M2” Movement stops when… -Programmed position is reached -Any button is pressed (on backrest, seatrest, foot pedal or hand remote controller)
9/10 Lower Section 11	 Ambient Light	There are 14 lighting modes and 12 brightness levels. Briefly press the “SET” button. The “SET” indicator will flash, indicating entry into the light strip control mode. Briefly press the “SET” button again, or leave the light strip buttons inactive for more than 10 seconds, to exit the mode. When the light strip is OFF, briefly press “M1” to turn it ON. When the light strip is ON: -Long press “M1” to turn the light strip OFF. -Briefly press “M1” to switch between lighting modes: 1. Solid Color Modes: White, Red, Green, Blue, Red + Green, Red + Blue 2. Single Color Fade Modes: White Fade, Red Fade, Green Fade, Blue Fade 3. Single Color Flash Modes: White Flash, Red Flash, Green Flash, Blue Flash 4. Lights OFF “M2” is used for brightness adjustment of the light strip, with a total of 12 levels. Brightness can be adjusted from dim to bright or from bright to dim. When the minimum or maximum level is reached, the light strip will flash twice as an indication, then reverse the adjustment direction. Both short press and long press operations are supported.

12	Reset	At any position, press “Reset” button (on the backrest, seatrest, or hand remote controller) … -The chair automatically moves to the entrance position so that your patient may get on or off the chair. Backrest moves to the upright position Chair tilt moves to the flat position Chair height moves to the minimum foot moves down to the maximum Movement stops when… -Entrance position is reached -Any button is pressed (on backrest, seatrest, foot pedal or hand remote controller) *Note: To avoid damaging the chair, the reset function will be disabled when the footrest is extended. Before using the reset function, ensure that the foot extension is retracted and firmly pressed against the footrest. At this point, the safety switch of the extension device is activated, and the reset function will take effect.
13	Lock	Press and hold for 3 seconds to activate the lock function. When the lock mode is activated, all other buttons are disabled and the motors will not operate. Press and hold for 3 seconds again to deactivate the lock function.
14	Heating button (Optional)	Pressing the button, the light is on, the heating function works; pressing the button again, the light is off, the heating function stops working.


Notes:
1.The heating function is only available for the models with heating function.
2.Different hand controllers should be chosen according to different configuration.


7. Technical Parameters


Power	100-120V～ or 220-240V～ ,50/60Hz
Maximum Power	300W
Environment Temperature	0°C ~ + 40°C
Relative Humidity	30% ~ 90%
Lifting Rated Load	200kg
Package Size	2296 :1500 × 620 × 615 mm 2296B / 2296B PRO:1370 × 620 × 615 mm

2296 / 2296B / 2296B PRO

Unit: mm

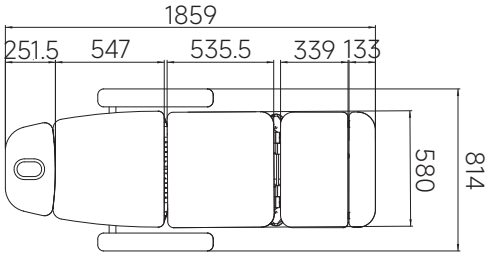

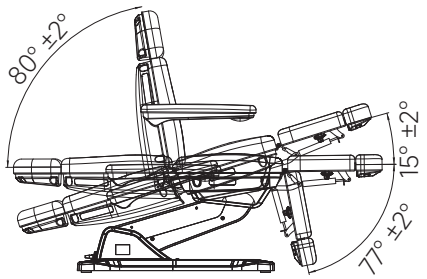

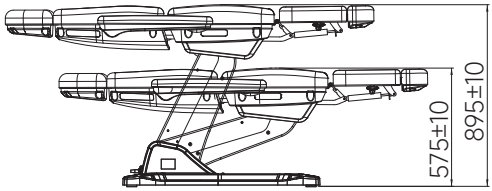

8. Maintenance

1. After every treatment, please only use neutral solution to clear the dust, stains on leather, metal part or other parts. Disinfecting solution like alcohol, acid or alkaline solution are forbidden.This is to prevent the lifetime of the components from being shortened.
2. Please lubricate the moving parts regularly (once a year).
3. When the headrest is stuck, it can be improved by applying lubricating oil.

9. Troubleshooting

The Fault Phenomenon	Reason	Solution
motor can't work normally	1. The power cord is unconnected or not plugged well.	1. Connect the power cord or plug it well.
	2. Poor quality of the hand controller or foot controller.	2. Replace the hand controller or foot controller.
	3. Poor quality of the control box.	3. Please contact maintenance center or supplier for troubleshooting.
	4. Repture of motor tail.	
	5. Motor was damaged.	
Abnormal Sound	1. The rotating parts are short of lubricating oil.	1. Add lubricating oil.
	2. Rotating positions (such as hinge, POM sets, gas lift) are short of lubricating oil.	2. Add lubricating oil.
	3. Motor quality problems.	3. Replace the motor.

If the problem persists after following the above steps
please contact maintenance center or supplier to solve it.

10. Disposal

Contact its local authorities to determine the proper method of disposal.

11. Symbols explanation

	Refer to instruction manual		Manufacturer
	WEEE		CE
	Date of manufacturer		Authorized representative in the European Community
	Warning		Series NO.
	Keep dry from rain rom rain		Fragile, handle with care
	Keep away from sunlight		Stacking limit by mass of 250kg
	Upward		No tumbling
	Be careful		No clasping

CE

The machinery fulfils the following relevant provisions:

Directive 2006/42/EC

Directive 2014/30/EU

Directive 2014/35/EU

Directive2011/65/EU

SILVERFOX CORPORATION LIMITED
Adresse: NO.18, 1st TongLe Road, TangXia Town, PengJiang District, JiangMen City, GuangDong Province, P.R. China.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

▲ Product components may be subject to changes without prior notice. Actual appearance may vary from images.

SILVERFOX

2296 Series Sillón de tratamientos faciales

Le damos la bienvenida a nuestro producto.
El fabricante se reserva el derecho a mejorar el diseño y modificar el producto sin previo aviso.
Versión A0

1. Acerca de este manual

Este manual tiene carácter meramente informativo para el manejo de este modelo concreto. Si se utiliza el manual para otros fines, no asumiremos ninguna responsabilidad por las consecuencias que de ello se deriven.

Toda la información contenida en este manual está protegida por derechos de autor y no podrá copiarse ni traducirse en ninguna parte de estas especificaciones sin el consentimiento por escrito de nuestra empresa, SILVERFOX.

2. Advertencia

Riesgos eléctricos

- El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y provista de toma de tierra, para evitar el riesgo de incendio y descarga eléctrica.
- El cable de tierra del cable de alimentación solo sirve como conexión a tierra funcional.
- No coloque el dispositivo en un lugar en el que resulte difícil desconectarlo de la red eléctrica.
- Se debe cortar el suministro eléctrico antes de sustituir componentes eléctricos o limpiar el equipo.

No coloque el dispositivo en lugares húmedos, como el cuarto de baño, para evitar descargas eléctricas u otros fallos de funcionamiento; mantenga el mando a distancia y la caja de control alejados del agua.

Si el enchufe está dañado, póngase en contacto con el distribuidor, el centro de servicio técnico o personal cualificado y con la experiencia necesaria para que lo repare, a fin de evitar cualquier peligro.

Controles medioambientales

- No coloque ni utilice el equipo en lugares donde se estén realizando trabajos de pintura o recubrimiento, ni donde se suministre oxígeno.
- Protección contra descargas eléctricas: Clase I
- Solo para uso en interiores
-

Protocolo operativo

- Después de su uso, mantenga el tapizado en posición horizontal a 180°.
- Este equipo debe ser manejado por personal cualificado que esté familiarizado con su estructura, rendimiento e instrucciones de uso, y que debe realizar un mantenimiento periódico.
- Este equipo no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas que carezcan de la experiencia o los conocimientos adecuados, a menos que estén bajo supervisión continua o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro por parte de una persona cualificada responsable de su seguridad.ADVERTENCIA: Durante el funcionamiento del equipo, compruebe que el rango de movimiento esté libre de obstáculos para evitar riesgos de aplastamiento o enredamiento.

Eliminación y modificación

- No está permitido realizar modificaciones en este dispositivo.
- Una vez finalizada su vida útil, el equipo y los accesorios deben desecharse de acuerdo con la normativa local.

3. Precauciones


Protocolo de mantenimiento

- No repare ni realice tareas de mantenimiento en este dispositivo durante las operaciones de tratamiento.
- Si el usuario o el paciente tienen conocimiento de cualquier incidente grave relacionado con este equipo, deben notificarlo a las autoridades reguladoras del país del usuario o del paciente y al fabricante.
- Apriete periódicamente los tornillos y las tuercas para evitar fallos de funcionamiento causados por compnentes sueltos, deslizamientos, vibraciones y caídas.
- Durante el mantenimiento, los operadores no deben desmontar ningún componentes de la silla.
- No utilice este producto si presenta un mal funcionamiento. Si se detecta cualquier fenómeno o sonido anormal, detenga inmediatamente el funcionamiento e inspeccione el equipo. El funcionamiento solo podrá reanudarse una vez corregido el mal funcionamiento.
- El mantenimiento debe ser realizado por profesionales cualificados.

- Después de cada tratamiento, utilice una solución neutra para eliminar el polvo y las manchas del cuero.
- Las sustituciones deben ser realizadas por profesionales cualificados. Nuestra empresa puede proporcionar esquemas de circuitos,guías de resolución de problemas u otros materiales de mantenimiento útiles como referencia para profesionales.


Protocolo operativo

- Lea atentamente este manual antes de la instalación, el uso y el ajuste, y guárdelo en un lugar seguro.
- Respete los procedimientos de seguridad, no sobrecargue la mesa, asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad estén completos y en buen estado, y elimine inmediatamente cualquier situación de riesgo.
- Utilice el producto siguiendo estrictamente las etiquetas de advertencia adheridas al mismo. Para controlar la elevación completa de la silla, debe pulsar el botón de forma continua hasta que la silla se encuentre en la posición deseada.
- Evite las operaciones con carga en un solo punto. (distribuya el peso de manera uniforme)
- Ciclo de trabajo del motor: ≤2 minutos ENCENDIDO / ≥18 minutos APAGADO. (el motor está diseñado para funcionar durante un máximo de 2 minutos, seguidos de un mínimo de 18 minutos de descanso)
- Al ajustar cada componente, mantenga las manos, los pies y la cabeza alejados de los puntos indicados por las flechas que se muestran en la imagen siguiente.

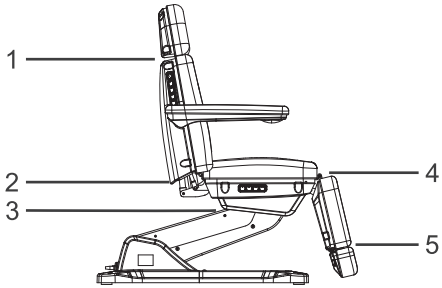

4. Instalación

- Desembala la caja y revisa el producto para asegurarte de que está en buen estado y de que se incluyen todos los accesorios y piezas de repuesto .Si tienes alguna duda, ponte en contacto con tu distribuidor.
- Coloca el producto en una zona de la habitación que esté seca, limpia y sea adecuada para su uso, dejando suficiente espacio alrededor del dispositivopara su funcionamiento. Asegúrate de que el suelo esté nivelado. Si el suelo presenta desniveles, gira las patas de goma para compensar cualquier desnivel y garantizar la estabilidad.
- Nota: No se necesitan tornillos adicionales para fijar la mesa al suelo.
- Conecta correctamente el enchufe del producto a la toma de corriente (tal y como se muestra en la imagen).

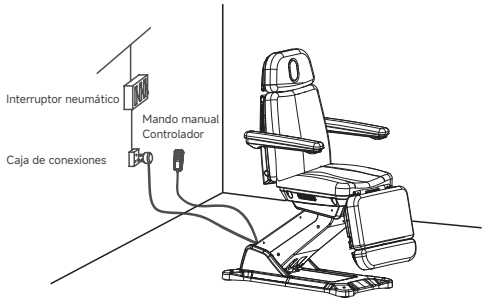

5. Estructura de los productos


Este dispositivo está compuesto por una caja de control, un motor, tornillería, componentes de plástico y cuero.

Descripción de la función


Camilla de belleza eléctrica, accionada por un sistema motorizado interno que permite un posicionamiento preciso y ajustable.
Diseñada para proporcionar un apoyo estable a los clientes durante diversos tratamientos de belleza y cuidado e la piel.

Esquema del sistema de circuitos

2296

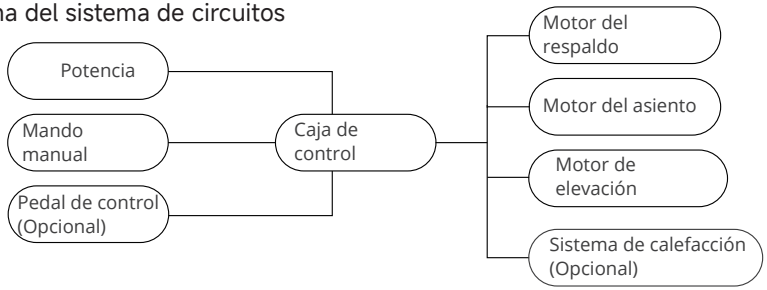


2296B
2296B PRO

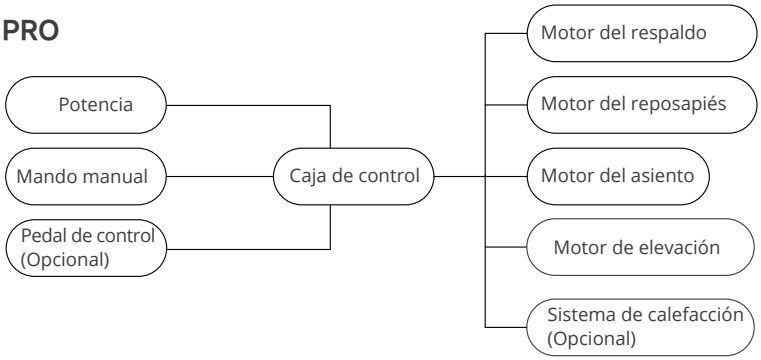


La caja de control
Según el modelo, este dispositivo incluye ajuste del ángulo del respaldo, ajuste del ángulo del cojín del asiento y ajuste de la altura. Se trata de una estructura integral. (Como se muestra en la imagen)

2296

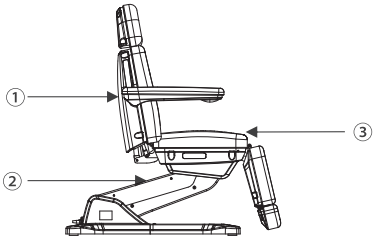

① ajuste del ángulo del respaldo
② ajuste de la elevación
③ ajuste del ángulo del asiento
④ Ajuste del ángulo del reposapiés (Ajuste manual)

2296B / 2296B PRO

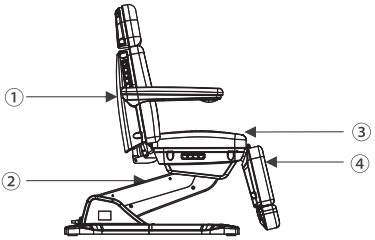


① ajuste del ángulo del respaldo
② ajuste de la elevación
③ ajuste del ángulo del asiento
④ ajuste del ángulo del reposapiés


6. Instrucciones de uso

2296


1.Configuración estándar
(Mando manual)

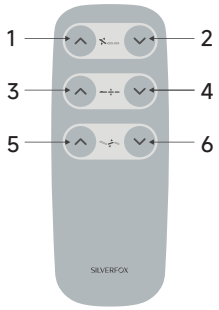

2.Configuración opcional
(Controlador manual)

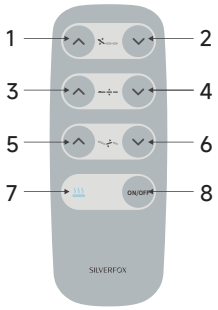


3. Configuración opcional
(Controlador de pie)

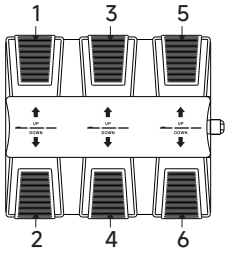


No.	Descripción	Funcionamiento
1/2	Respaldo hacia arriba o hacia abajo	Mantenga pulsado el botón correspondiente para mover la silla; El movimiento se detiene cuando… Se suelta el botón; Se alcanza la posición máxima o mínima.
3/4	Silla: subir o bajar	
5/6	Inclinar hacia ARRIBA o hacia ABAJO	
7	Luz indicadora de la función de calefacción	Al pulsar el botón, la luz se enciende y la función de calefacción funciona; al pulsar el botón de nuevo, la luz se apaga y la función de calefacción deja de funcionar.
8	Botón de calentamiento (opcional)	

2296B


1.Configuración estándar
(Mando manual)

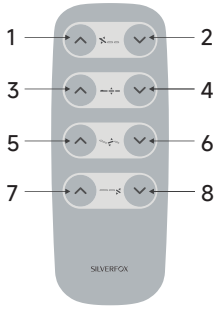

2.Configuración opcional
(Controlador manual)

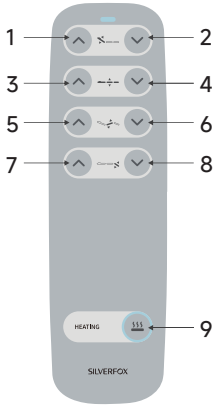


3. Configuración opcional
(Controlador de pie)

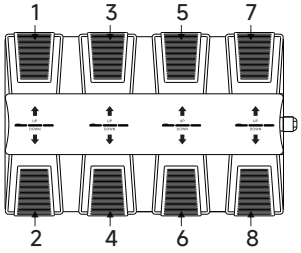


No.	Descripción	Funcionamiento
1/2	Respaldo ARRIBA o ABAJO	Mantén pulsado el botón correspondiente para mover la silla El movimiento se detiene cuando… Se suelta el botón Se alcanza la posición máxima o mínima.
3/4	Telesilla: SUBIR o BAJAR	
5/6	Inclinar hacia ARRIBA o hacia ABAJO	
7/8	Pie ARRIBA o ABAJO	
9	Botón de calentamiento (Opcional)	Al pulsar el botón, la luz se enciende y la función de calefacción funciona; al pulsar el botón de nuevo, la luz se apaga y la función de calefacción deja de funcionar.

2296B PRO


Configuración standard
(Mando de mano)

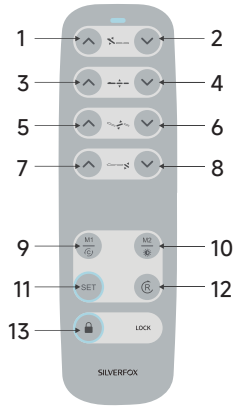



Configuración opcional
(Mando de mano)

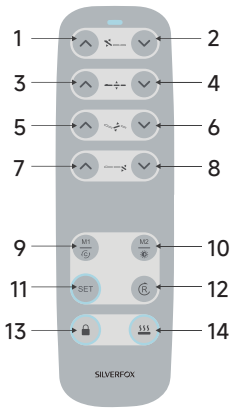

Configuración opcional
(mando de pie)

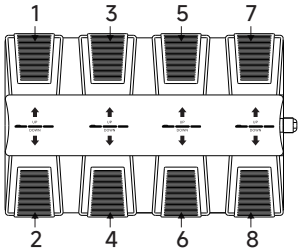

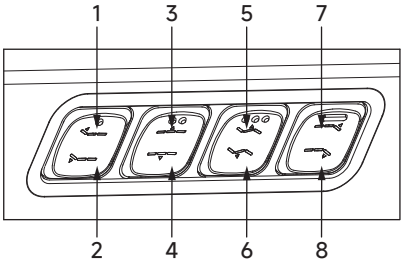

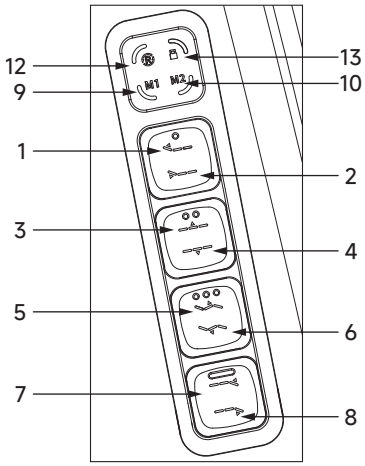

No.	Descripción	Funcionamiento
1/2	Respaldo hacia arriba o hacia abajo	Mantenga pulsado el botón correspondiente para mover la silla; El movimiento se detiene cuando… Se suelta el botón; Se alcanza la posición máxima o mínima.
3/4	Silla: subir o bajar	
5/6	Inclinar hacia ARRIBA o hacia ABAJO	
7/8	Pies hacia arriba o hacia abajo	
9/10 Parte superior Sección	 Función de memoria Programación de las posiciones de la silla	La función de programación te permite recuperar fácilmente dos posiciones de la silla que utilizas con frecuencia mediante los botones M1 y M2. -Ajusta la silla a la posición deseada. -Mantén pulsado el botón «M1» o «M2» (situado en el respaldo o en el mando a distancia) durante 3 segundos. Oirá un pitido y la posición se establecerá en «M1» o «M2». Para recuperar una posición programada… -Pulse el botón de la posición deseada «M1» o «M2» El movimiento se detiene cuando… -Se alcanza la posición programada -Se pulsa cualquier botón (en el respaldo, el reposacabezas, el pedal o el mando a distancia)
9/10 Parte inferior Sección 11	 Luz ambiental	Hay 14 modos de iluminación y 12 niveles de brillo. Pulse brevemente el botón «SET». El indicador «SET» parpadeará, lo que indica que se ha entrado en el modo de control de la tira de luces. Pulse brevemente el botón «SET» de nuevo, o mantenga inactivos los botones de la tira de luces durante más de 10 segundos, para salir del modo. Cuando la tira de luces esté apagada, pulse brevemente «M1» para encenderla. Cuando la tira de luces esté encendida: - Mantenga pulsado «M1» para apagar la tira de luces. -Pulse brevemente «M1» para cambiar entre los modos de iluminación: 1. Modos de color fijo: Blanco, rojo, verde, azul, rojo + verde, rojo + azul 2. Modos de fundido de un solo color: Fundido blanco, fundido rojo, fundido verde, fundido azul 3. Modos de parpadeo de un solo color: Parpadeo blanco, parpadeo rojo, parpadeo verde, parpadeo azul 4. Luces apagadas «M2» se utiliza para ajustar el brillo de la tira de luces, con un total de 12 niveles. El brillo se puede ajustar de atenuado a brillante o de brillante a atenuado. Cuando se alcanza el nivel mínimo o máximo, la tira de luces parpadeará dos veces como indicación y, a continuación, invertirá la dirección del ajuste. Se admiten tanto pulsaciones cortas como largas.

12	Restablecer	En cualquier posición, pulse el botón «Reset» (situado en el respaldo, el asiento o el mando a distancia)… -La silla se desplaza automáticamente a la posición de acceso para que el paciente pueda sentarse o levantarse de la silla. El respaldo se coloca en posición vertical; la inclinación de la silla se coloca en posición horizontal; la altura de la silla se ajusta al mínimo; el reposapiés se baja al máximo; el movimiento se detiene cuando… -Se alcanza la posición de entrada; -Se pulsa cualquier botón (en el respaldo, el asiento, el pedal o el mando a distancia). *Nota: Para evitar daños en la silla, la función de reinicio se desactivará cuando el reposapiés esté extendido. Antes de utilizar la función de reinicio, asegúrese de que la extensión del reposapiés esté retraída y firmemente presionada contra el reposapiés. En ese momento, se activará el interruptor de seguridad del dispositivo de extensión y la función de reinicio surtirá efecto.
13	Cerrar	Mantenga pulsado durante 3 segundos para activar la función de bloqueo.Cuando la función de bloqueo está activada, todos los demás botones quedan deshabilitados y los motores no pueden accionarse. Mantenga pulsado de nuevo durante 3 segundos para desactivar la función de bloqueo.
14	Botón de calentamiento (Opcional)	Pulse el botón para activar la función de calefacción; el indicador luminoso se encenderá. Pulse el botón de nuevo para desactivar la función de calefacción; el indicador luminoso se apagará.


Notas:
1. La función de calefacción solo está disponible en los modelos que la incorporan.
2. Se deben elegir mandos a distancia diferentes según la configuración.


7. Parámetros técnicos


Potencia	100-120V～ or 220-240V～ ,50/60Hz
Potencia máxima	300W
Temperatura ambiente	0°C ~ + 40°C
Humedad relativa	30% ~ 90%
Carga nominal de elevación	200kg
Tamaño del paquete	2296 :1500 × 620 × 615 mm 2296B / 2296B PRO:1370 × 620 × 615 mm

2296 / 2296B / 2296B PRO

Unit: mm

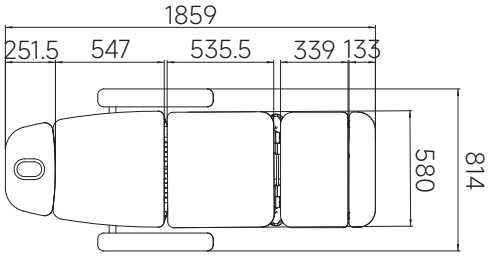

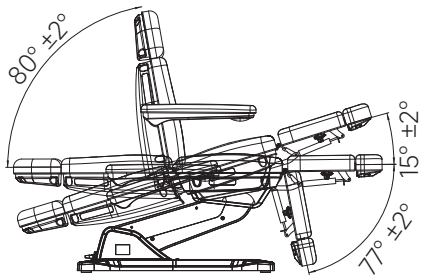

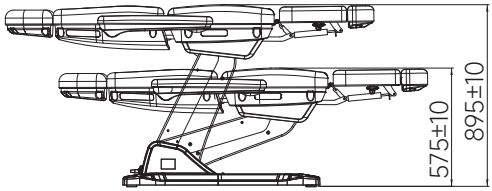

8. Mantenimiento

1. Después de cada tratamiento, utilice únicamente una solución neutra para eliminar el polvo y las manchas del cuero, las piezas metálicas u otras partes. Queda prohibido el uso de soluciones desinfectantes como alcohol, ácidos o soluciones alcalinas. Esto es para evitar que se reduzca la vida útil de los componentes.
2. Lubrique las piezas móviles con regularidad (una vez al año).
3. Si el reposacabezas se atasca, se puede solucionar aplicando aceite lubricante.

9. Solución de problemas

Posible incidencia	Motivo	Solución
El motor no funciona correctamente	1. El cable de alimentación no está conectado o no está bien enchufado.	1. Conecta el cable de alimentación o enchúfalo bien.
	2. Mala calidad del mando de mano o del pedal.	2. Cambia el mando manual o el mando de pie.
	3. Mala calidad de la caja de control.	3. Póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para resolver el problema.
	4. Rotura de la cola motora.	
	5. El motor se averió.	
Ruido extraño	1. Las piezas giratorias carecen de aceite lubricante.	1. Añade aceite lubricante.
	2. Las piezas giratorias (como bisagras,conjuntos de POM y resortes de gas) tienen falta de aceite lubricante.	2. Añade aceite lubricante.
	3. Motor quality problems.	3. Cambia el motor.

Si el problema persiste tras seguir los pasos anteriores
Póngase en contacto con el servicio técnico o con el proveedor para resolverlo.

10. Eliminación

Póngase en contacto con las autoridades locales para determinar el método adecuado de eliminación.

11. Explicación de los símbolos

	Consulte el manual de instrucciones		Fabricante
	WEEE		CE
	Fecha de fabricación		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Advertencia		Número de serie
	Mantenerlo seco para que no se moje con la lluvia		Frágil, manipular con cuidado
	Mantener alejado de la luz solar		Límite de apilamiento de 250 kg
	Hacia arriba		Sin volteos
	Ten cuidado		Sin abroches

La maquinaria cumple las siguientes disposiciones pertinentes:
Directiva 2006/42/CE
Directiva 2014/30/UE
Directiva 2014/35/UE
Directiva 2011/65/UE

SILVERFOX CORPORATION LIMITED
Adresse: NO.18, 1st TongLe Road, TangXia Town, PengJiang District, JiangMen City,
GuangDong Province, P.R. China.



De acuerdo con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los RAEE deben recogerse y tratarse por separado. Si en algún momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, NO lo tire junto con los residuos domésticos. Envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE, siempre que estén disponibles.

▲ Los componentes del producto pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. El aspecto real puede diferir del de las imágenes.

SILVERFOX

2296 Série Fauteuil de soins du visage

Nous vous souhaitons la bienvenue parmi les utilisateurs de notre produit.
Le fabricant se réserve le droit d'améliorer la conception et
de modifier le produit sans préavis.
Version A0

1. À propos de ce manuel

Ce manuel est destiné uniquement à servir de référence lors de l'utilisation de ce modèle spécifique. Si le manuel est utilisé à d'autres fins,
nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences qui pourraient en découler.
Toutes les informations contenues dans ce manuel sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent être copiées ou traduites, en tout ou partie,
sans l'autorisation écrite de notre société SILVERFOX.

2. Avertissement

Risques électriques

- La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et dotée d'une mise à la terre, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- Le fil de terre du cordon d'alimentation sert uniquement de mise à la terre fonctionnelle.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il serait difficile de le débrancher.
- Il faut couper l'alimentation électrique avant de remplacer des composants électriques ou de nettoyer l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits humides, tels que les salles de bains, afin d'éviter tout risque
- d'électrocution ou d'autres dysfonctionnements ;
  Évitez d'exposer la télécommande et le boîtier de commande à l'eau.
  Si la fiche est endommagée, veuillez contacter le revendeur, le centre de service après-vente ou un technicien qualifié et expérimenté pour la faire réparer afin d'éviter tout danger.

Risque mécanique

- Ne montez pas sur cet appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil, jouer avec ou le manipuler, et ne le placez pas à leur portée.
- La capacité de charge maximale de cette chaise est de 200 kg. Le dépassement de cette capacité peut
- entraîner des risques pour la sécurité.

Contrôles environnementaux

- Veuillez ne pas installer ni utiliser l'appareil dans des lieux où des travaux de peinture ou de revêtement sont en cours ou où de l'oxygène est distribué.
- Protection contre les chocs électriques : Classe I
- For indoor use only

Protocole opérationnel

- Après utilisation, veuillez maintenir le revêtement à plat à 180°.
- Cet équipement doit être utilisé par du personnel qualifié connaissant bien sa structure, ses performances et ses instructions d'utilisation, et chargé d'effectuer un entretien régulier.
- Cet équipement ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites et qui ne disposent pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous surveillance constante ou qu'elles aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité de la part d'une personne qualifiée chargée de veiller à leur sécurité.
  AVERTISSEMENT : Pendant le fonctionnement de l'équipement, assurez-vous que la zone de mouvement est dégagée de tout obstacle afin d'éviter tout risque d'écrasement ou d'enchevêtrement.

Cession et modification

- Il est interdit d'apporter la moindre modification à cet appareil.
- À la fin de leur durée de vie, l'équipement et les accessoires doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.

3. Précautions


Protocole d'entretien

- Ne procédez à aucune réparation ni opération de maintenance sur cet appareil pendant son fonctionnement
  Si l'utilisateur et/ou le patient constate un incident grave lié à cet équipement, il doit
  le signaler aux autorités réglementaires de son pays ainsi qu'au fabricant.
  Resserrez régulièrement les boulons et les écrous afin d'éviter tout dysfonctionnement dû à des pièces desserrées, au glissement, aux vibrations et aux chutes.
- Pendant l'entretien, les opérateurs ne doivent démonter aucun composant du fauteuil.
  N'utilisez pas cet appareil s'il présente un dysfonctionnement. Si vous constatez un phénomène ou un bruit anormal, arrêtez immédiatement l'appareil et inspectez-le. Vous ne pourrez reprendre l'utilisation qu'une fois le dysfonctionnement corrigé.
- L'entretien doit être effectué par des professionnels qualifiés.

- Après chaque traitement, utilisez une solution neutre pour éliminer la poussière et les taches du cuir. Les remplacements doivent être effectués par des professionnels qualifiés. Notre entreprise peut fournir des schémas électriques, des guides de dépannage ou d'autres documents d'entretien utiles à l'usage des professionnels.


Protocole opérationnel

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation, la mise en service et le réglage, et conservez-le dans un endroit sûr.
- Respectez les consignes de sécurité, ne surchargez pas la table, assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont complets et fiables, et remédiez immédiatement à toute situation présentant un risque.
- Utilisez le produit en respectant scrupuleusement les étiquettes d'avertissement apposées sur celui-ci. Pour contrôler la montée de l'ensemble du fauteuil, il faut maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil atteigne la position souhaitée.
- Évitez de concentrer la charge sur un seul point. (Répartissez le poids de manière uniforme.)
- Cycle de service du moteur : ≤ 2 minutes en marche / ≥ 18 minutes à l'arrêt. (Le moteur est conçu pour fonctionner pendant 2 minutes au maximum, suivies d'au moins 18 minutes de repos.)
- Lorsque vous réglez chaque composant, veillez à garder vos mains, vos pieds et votre tête à l'écart des pointes de flèche indiquées sur l'image ci-dessous.

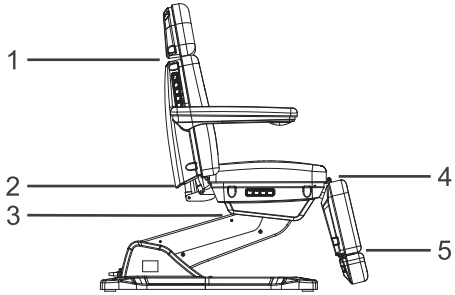

4. Installation

- Déballez le carton et vérifiez que le produit est en bon état et que tous les accessoires et pièces de rechange sont bien présents. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur.
- Placez l'appareil dans un endroit sec, propre et propice à son utilisation, en laissant suffisamment d'espace autour de celui-ci pour permettre son bon fonctionnement. Assurez-vous que le sol est plat. Si le sol est irrégulier, tournez les patins en caoutchouc pour compenser les irrégularités et garantir la stabilité de l'appareil.
- Remarque : aucune vis supplémentaire n'est nécessaire pour fixer la table au sol.
- Branchez correctement la fiche de l'appareil à la prise de courant (comme indiqué sur l'image).

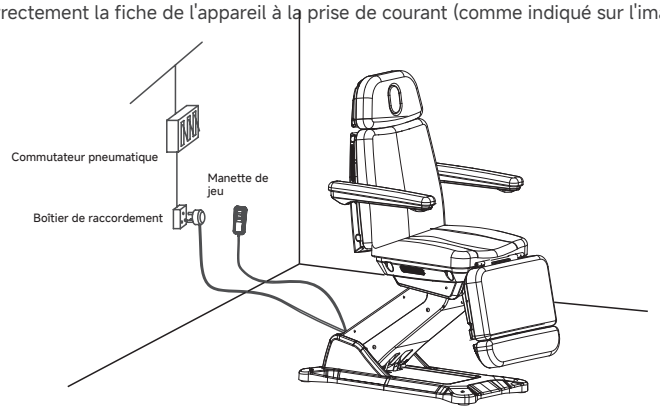

5. Composition des produits


Cet appareil se compose d'un boîtier de commande, d'un moteur, de pièces métalliques, de composants en plastique et de cuir.

Description de la fonction


Table de soins électrique, équipée d'un système motorisé interne permettant un réglage précis et ajustable de la position. Conçue pour offrir un soutien stable aux clients lors de divers soins de la peau et traitements esthétiques.

Schéma du circuit

2296

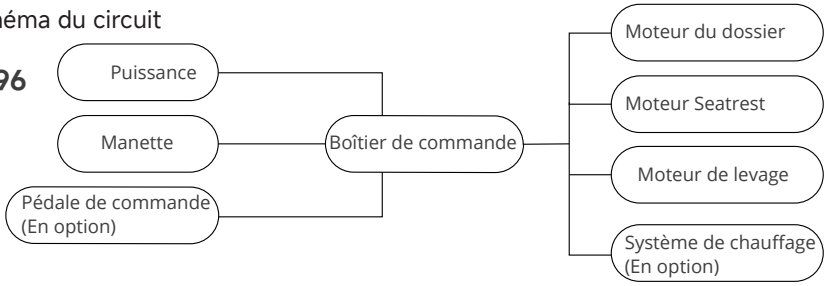


2296B
2296B PRO

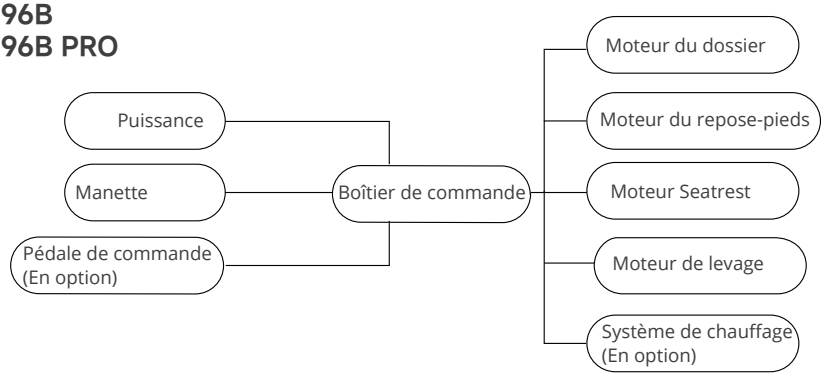

Le boîtier de commande


Selon le modèle, cet appareil permet de régler l'inclinaison du dossier, l'inclinaison du coussin d'assise et la hauteur. Il s'agit d'une structure monobloc. (Comme le montre l'image)

2296

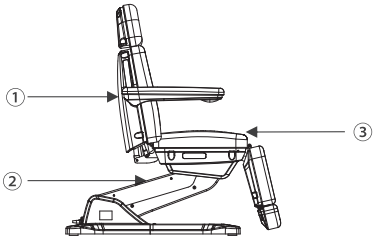

① réglage de l'inclinaison du dossier
② réglage de la levée
③ réglage de l'inclinaison du siège
④ Réglage de l'angle du repose-pieds (Réglage manuel)

2296B / 2296B PRO

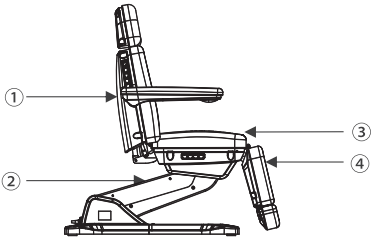


① réglage de l'inclinaison du dossier
② réglage de la levée
③ réglage de l'inclinaison du siège
④ réglage de l'angle du repose-pieds


6. Mode d'emploi

2296


1.Configuration standard (Manette)

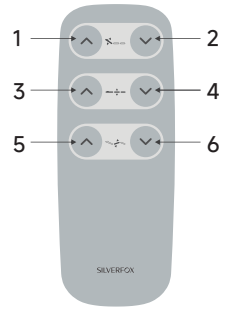

2.Configuration en option (Manette)

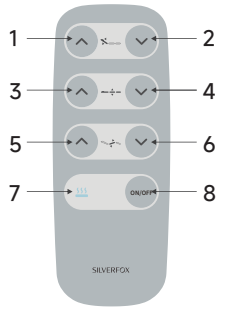


3. Configuration en option (Pédale de commande)

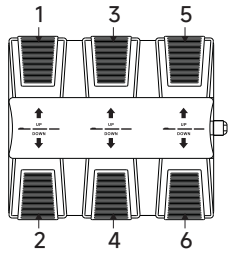


No.	Description	Fonctionnement
1/2	Dossier vers le HAUT ou vers le BAS	Maintenez le bouton correspondant enfoncé pour déplacer le fauteuil Le mouvement s'arrête lorsque… Vous relâchez le bouton La position maximale ou minimale est atteinte.
3/4	Télésiège : monter ou descendre	
5/6	Incliner vers le HAUT ou vers le BAS	
7	Voyant lumineux de la fonction chauffage	En appuyant sur le bouton, la lumière s'allume et la fonction de chauffage se met en marche ; en appuyant à nouveau sur le bouton, la lumière s'éteint et la fonction de chauffage s'arrête.
8	Bouton de chauffage (en option)	

2296B


1.Configuration standard (Manette)

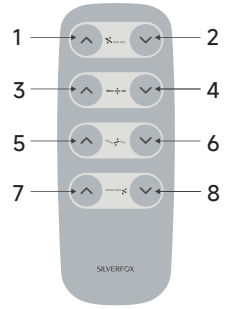

2.Configuration en option (Manette)

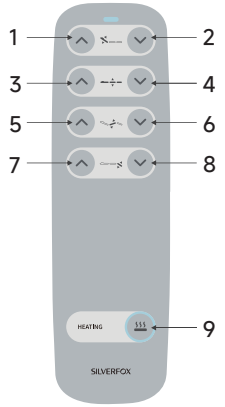


3. Configuration en option (Pédale de commande)

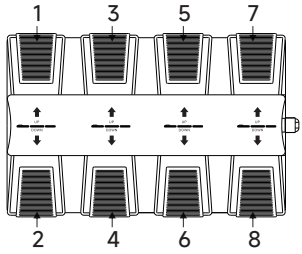


No.	Description	Fonctionnement
1/2	Dossier vers le HAUT ou vers le BAS	Maintenez le bouton correspondant enfoncé pour déplacer le fauteuil Le mouvement s'arrête lorsque… Vous relâchez le bouton La position maximale ou minimale est atteinte.
3/4	Télésiège : monter ou descendre	
5/6	Incliner vers le HAUT ou vers le BAS	
7/8	Pied vers le HAUT ou vers le BAS	
9	Bouton de chauffage (En option)	En appuyant sur le bouton, la lumière s'allume et la fonction de chauffage se met en marche ; en appuyant à nouveau sur le bouton, la lumière s'éteint et la fonction de chauffage s'arrête.

2296B PRO


1.Configuration standard
(Manette)

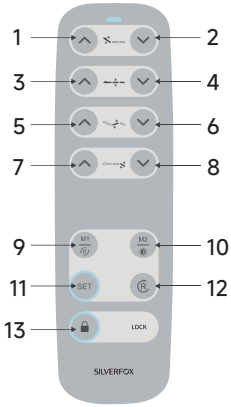



2.Configuration en option
(Manette)

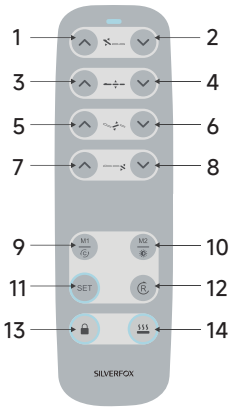

3. Configuration en option
(Pédale de commande)

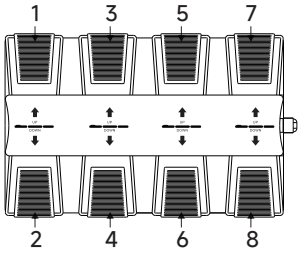

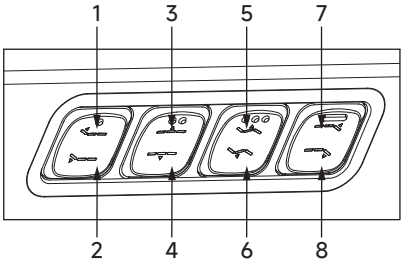

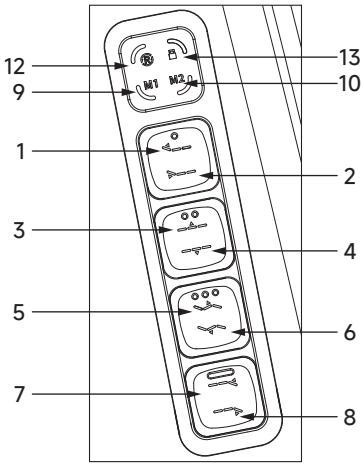

No.	Description	Fonctionnement
1/2	Dossier vers le HAUT ou vers le BAS	Maintenez le bouton correspondant enfoncé pour déplacer le fauteuilLe mouvement s'arrête lorsque… Vous relâchez le bouton La position maximale ou minimale est atteinte.
3/4	Télésiège : monter ou descendre	
5/6	Incliner vers le HAUT ou vers le BAS	
7/8	Pied vers le HAUT ou vers le BAS	
9/10 Partie supérieure Section	 Fonction mémoire Programmation des positions du fauteuil	La fonction de programmation vous permet de rappeler facilement deux positions fréquemment utilisées du fauteuil à l'aide des boutons M1 et M2. - Réglez le fauteuil dans la position souhaitée - Appuyez sur le bouton « M1 » ou « M2 » (situé sur le dossier ou sur la télécommande) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip et la position sera enregistrée sous « M1 » ou « M2 ». Pour rappeler une position programmée… -Appuyez sur le bouton de la position souhaitée « M1 » ou « M2 » Le mouvement s'arrête lorsque… -La position programmée est atteinte -Un bouton quelconque est enfoncé (sur le dossier, l'assise, la pédale ou la télécommande manuelle)
9/10 Partie inférieure 11	 Lumière ambiante	Il existe 14 modes d'éclairage et 12 niveaux de luminosité. Appuyez brièvement sur le bouton « SET ». Le voyant « SET » clignotera, indiquant que vous êtes en mode de commande de la bande lumineuse. Appuyez brièvement à nouveau sur le bouton « SET », ou laissez les boutons de la bande lumineuse inactifs pendant plus de 10 secondes, pour quitter ce mode. Lorsque la bande lumineuse est éteinte, appuyez brièvement sur « M1 » pour l'allumer. Lorsque la bande lumineuse est allumée : - Appuyez longuement sur « M1 » pour éteindre la bande lumineuse. - Appuyez brièvement sur « M1 » pour passer d'un mode d'éclairage à l'autre : 1. Modes couleur fixe : Blanc, rouge, vert, bleu, rouge + vert, rouge + bleu 2. Modes fondu couleur unique : Fondu blanc, fondu rouge, fondu vert, fondu bleu 3. Modes clignotement couleur unique : Clignotement blanc, clignotement rouge, clignotement vert, clignotement bleu 4. Lumières éteintes La touche « M2 » sert à régler la luminosité de la bande lumineuse, avec un total de 12 niveaux. La luminosité peut être réglée de faible à forte ou de forte à faible. Lorsque le niveau minimum ou maximum est atteint, la bande lumineuse clignote deux fois pour l'indiquer, puis inverse le sens du réglage. Les opérations par pression courte et longue sont toutes deux prises en charge.


12	Réinitialiser	Quelle que soit la position, appuyez sur le bouton « Reset » (situé sur le dossier, l'assise ou la télécommande) ... - Le fauteuil se met automatiquement en position d'accès afin que votre patient puisse s'asseoir ou se lever. Le dossier se met en position verticale L'inclinaison du fauteuil se met en position à plat La hauteur du fauteuil se met au minimum le repose-pieds s'abaisse au maximum Le mouvement s'arrête lorsque... -La position d'accès est atteinte -Un bouton quelconque est enfoncé (sur le dossier, l'assise, la pédale ou la télécommande) *Remarque : Pour éviter d'endommager le fauteuil, la fonction de réinitialisation sera désactivée lorsque le repose-pieds est déployé. Avant d'utiliser la fonction de réinitialisation, assurez-vous que l'extension du repose-pieds est rétractée et fermement appuyée contre le repose-pieds. À ce stade, le dispositif de sécurité de l'extension est activé, et la
13	Verrouiller	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage. Une fois le mode de verrouillage activé, tous les autres boutons sont désactivés et les moteurs ne fonctionnent plus. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction de verrouillage.
14	Bouton de chauffage (En option)	En appuyant sur le bouton, la lumière s'allume et la fonction de chauffage se met en marche ; en appuyant à nouveau sur le bouton, la lumière s'éteint et la fonction de chauffage s'arrête.


Remarques :
1. La fonction de chauffage n'est disponible que sur les modèles équipés de cette fonction.
2. Il convient de choisir des télécommandes adaptées en fonction de la configuration.


7. Caractéristiques techniques

Puissance	100-120V～ or 220-240V～ ,50/60Hz
Puissance maximale	300W
Température ambiante	0°C ~ + 40°C
Humidité relative	30% ~ 90%
Charge nominale de levage	200kg
Contenu de l'emballage	2296 :1500 × 620 × 615 mm 2296B / 2296B PRO:1370 × 620 × 615 mm

2296 / 2296B / 2296B PRO
Unit: mm

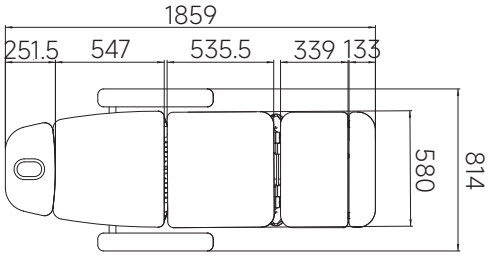

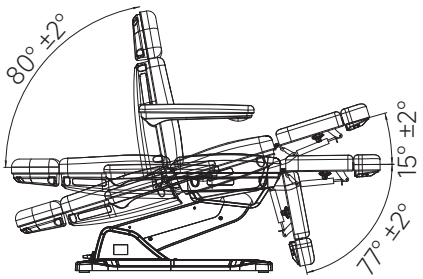

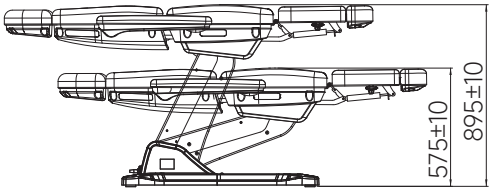

8. Entretien

1. Après chaque utilisation, veuillez utiliser uniquement une solution neutre pour éliminer la poussière et les taches sur le cuir, les pièces métalliques ou les autres éléments. L'utilisation de solutions désinfectantes telles que l'alcool, les solutions acides ou alcalines est interdite. Cette précaution vise à éviter de réduire la durée de vie des composants.
2. Veuillez lubrifier régulièrement les pièces mobiles (une fois par an).
3. Si l'appui-tête est bloqué, vous pouvez remédier à ce problème en appliquant de l'huile lubrifiante.

9. Dépannage

Le phénomène de la faille	Raison	Solution
le moteur ne fonctionne pas correctement	1. Le cordon d'alimentation n'est pas branché ou n'est pas bien branché.	1. Branchez le cordon d'alimentation ou enfoncez bien la fiche.
	2. Mauvaise qualité de la commande manuelle ou de la commande au pied.	2. Remplacez la télécommande manuelle ou la télécommande au pied.
	3. Mauvaise qualité du boîtier de commande.	3. Veuillez contacter le service de maintenance ou le fournisseur pour le dépannage.
	4. Rupture du nerf moteur de la queue.	
	5. Le moteur a été endommagé.	
Bruit anormal	1. The rotating parts are short of lubricating oil.	1. Ajoutez de l'huile lubrifiante.
	2. Rotating positions (such as hinge, POM sets, gas lift) are short of lubricating oil.	2. Ajoutez de l'huile lubrifiante.
	3. Motor quality problems.	3. Remplacez le moteur.

Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus
Veuillez contacter le service de maintenance ou le fournisseur pour résoudre ce problème.

10. Élimination

Contactez les autorités locales pour connaître la méthode d'élimination appropriée.

11. Explication des symboles

	Consultez le mode d'emploi		Fabricant
	WEEE		CE
	Date de fabrication		Représentant agréé dans la Communauté européenne
	Avertissement		Série NO.
	Protéger de la pluie		Fragile, manipuler avec précaution
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Limite d'empilage de 250 kg
	Vers le haut		Pas de culbutes
	Faites attention		Sans fermoir

La machine est conforme aux dispositions suivantes :
Directive 2006/42/CE
Directive 2014/30/UE
Directive 2014/35/UE
Directive 2011/65/UE

SILVERFOX CORPORATION LIMITED
Adresse: NO.18, 1st TongLe Road, TangXia Town, PengJiang District, JiangMen City, GuangDong Province, P.R. China.



De acuerdo con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los RAEE deben recogerse y tratarse por separado. Si en algún momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, NO lo tire junto con los residuos domésticos. Envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE, siempre que estén disponibles.

▲ Los componentes del producto pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. El aspecto real puede diferir del de las imágenes.

SILVERFOX

2296 Serie: Kosmetikliege

Herzlich willkommen bei der Nutzung unseres Produkts.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design zu verbessern und das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Version A0

1. Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch dient ausschließlich als Nachschlagewerk für den Betrieb dieses spezifischen Modells. Sollte das Handbuch für
andere Zwecke verwendet werden, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Folgen oder Schäden.
Alle Informationen in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Zustimmung unseres Unternehmens SILVERFOX weder ganz noch teilweise kopiert oder übersetzt werden.

2. Warnung

Stromgefahren

- Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit Schutzleiter gesteckt werden, um die
- Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden.
- Der Erdungsleiter im Netzkabel dient lediglich als Funktionserdung.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es schwierig ist, die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Beim Austausch elektrischer Bauteile oder bei der Reinigung des Geräts muss die Stromversorgung
- unterbrochen werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht an feuchten Orten wie Badezimmern auf, um Stromschläge oder andere Fehlfunktionen zu vermeiden; halten Sie die Fernbedienung und die Steuerbox von Wasser fern.
- Sollte der Stecker beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Händler, den Kundendienst oder an Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation und Erfahrung, um die Reparatur durchführen zu lassen und Gefahren zu vermeiden.

Mechanisches Risiko

- Stellen Sie sich nicht auf dieses Gerät.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht bedienen oder damit spielen und stellen Sie es nicht in ihrer Nähe auf oder in ihrer Reichweite ab.
- Die maximale Belastbarkeit dieses Stuhls beträgt 200 kg. Eine Überschreitung der Belastbarkeit kann zu Sicherheitsrisiken führen.

Umgebungssteuerung

- Bitte stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf und betreiben Sie es nicht an Orten, an denen Lackier- oder Beschichtungsarbeiten durchgeführt werden oder Sauerstoff zugeführt wird.
- Schutz vor Stromschlägen: Klasse I
- ⌂ Nur für den Gebrauch in Innenräumen

Betriebsprotokoll

- Bitte legen Sie die Polster nach dem Gebrauch flach auf (180°).
- Dieses Gerät sollte von geschultem Personal bedient werden, das mit seinem Aufbau, seiner Funktionsweise und den Betriebsanweisungen vertraut ist und das regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen sollte.
  Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, es sei denn, sie stehen unter ständiger Aufsicht oder wurden von einer qualifizierten Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in die sichere Bedienung eingewiesen.
  WARNUNG: Stellen Sie während des Betriebs des Geräts sicher, dass der Bewegungsbereich frei von Hindernissen ist, um Quetsch- oder Einklemmgefahren zu vermeiden.

Entsorgung und Änderung

- Änderungen an diesem Gerät sind nicht zulässig.
- Geräte und Zubehör müssen nach Ablauf ihrer Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

3. Vorsichtsmaßnahmen


Wartungsprotokoll

- Führen Sie während des Betriebs keine Reparatur- oder Wartungsarbeiten an diesem Gerät durchc.
  Sollte dem Anwender und/oder Patienten ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit diesem Gerät bekannt werden, ist dieser den zuständigen Behörden im Land des Anwenders bzw. des Patienten sowie dem Hersteller zu melden.
- Ziehen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig fest, um Fehlfunktionen durch lose Teile, Verrutschen, Vibrationen und Herunterfallen zu vermeiden.
- Während der Wartungsarbeiten dürfen die Bediener keine Teile des Stuhls zerlegen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Sollten Sie ungewöhnliche Erscheinungen oder Geräusche feststellen,
  stellen Sie den Betrieb sofort ein und überprüfen Sie das Gerät. Der Betrieb darf erst wieder aufgenommen werden, nachdem die Störung behoben wurde.
- Maintenance should be performed by trained professionals.

- Entfernen Sie nach jeder Behandlung Staub und Flecken mit einer neutralen Lösung vom Leder.
- Austauscharbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Unser Unternehmen stellt Schaltpläne, Anleitungen zur Fehlerbehebung und andere hilfreiche Wartungsunterlagen als Referenz für Fachleute zur Verfügung.


Betriebsprotokoll

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation, Inbetriebnahme und Einstellung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften, überlasten Sie den Tisch nicht, stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen vollständig und funktionsfähig sind, und beseitigen Sie unsichere Zustände unverzüglich.
- Beachten Sie bei der Verwendung des Produkts unbedingt die am Produkt angebrachten Warnhinweise. Um die Höhenverstellung des gesamten Stuhls zu steuern, muss die Taste so lange gedrückt gehalten werden, bis sich der Stuhl in der gewünschten Position befindet.
- Évitez de mettre tout le poids d'un seul côté. (Répartissez le poids de manière uniforme.)
- Cycle de service du moteur : ⩽ 2 minutes en marche / ⩾ 18 minutes à l'arrêt. (Le moteur est conçu pour fonctionner pendant 2 minutes au maximum, suivies d'au moins 18 minutes de repos.)
- Lorsque vous réglez chaque composant, veillez à garder vos mains, vos pieds et votre tête à l'écart des pointes de flèche indiquées sur l'image ci-dessous.

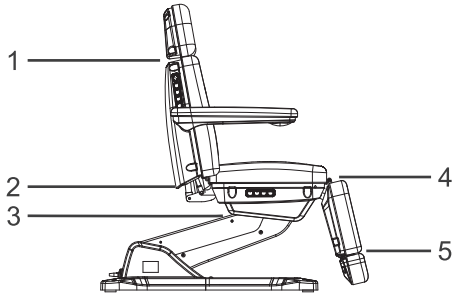

4. Installation

- Packen Sie den Karton aus und überprüfen Sie das Produkt, um sicherzustellen, dass es in einwandfreiem Zustand ist und dass sämtliches Zubehör sowie alle Ersatzteile vorhanden sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Stellen Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen und leicht zugänglichen Ort im Raum auf und lassen Sie dabei ausreichend Platz um das Gerät herum, damit es ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie sicher, dass der Boden eben ist. Bei unebenem Boden drehen Sie die Gummifüße, um Unebenheiten auszugleichen und die Stabilität zu gewährleisten.
- Hinweis: Es sind keine zusätzlichen Schrauben erforderlich, um den Tisch am Boden zu befestigen.
- Stecken Sie den Stecker des Produkts ordnungsgemäß in die Steckdose (wie auf dem Bild gezeigt).

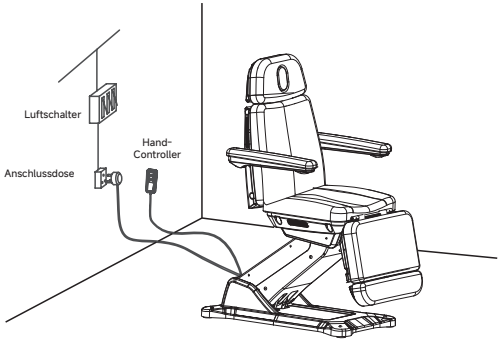

5. Zusammensetzung der Produkte


Dieses Gerät besteht aus einem Steuergerät, einem Motor, Metallteilen, Kunststoffkomponenten und Leder.

Stellenbeschreibung


Elektrische Behandlungsliege, ausgestattet mit einem integrierten Motorantrieb, der eine präzise und stufenlose Positionsverstellung ermöglicht.
Entwickelt, um den Kunden bei verschiedenen Hautpflege- und Schönheitsbehandlungen einen stabilen Halt zu bieten.

Schaltplan

2296

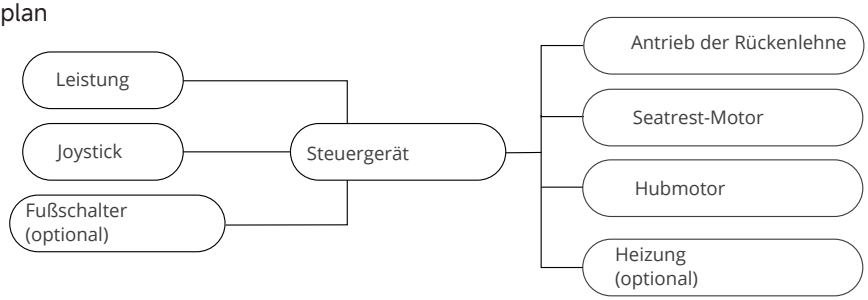


2296B
2296B PRO

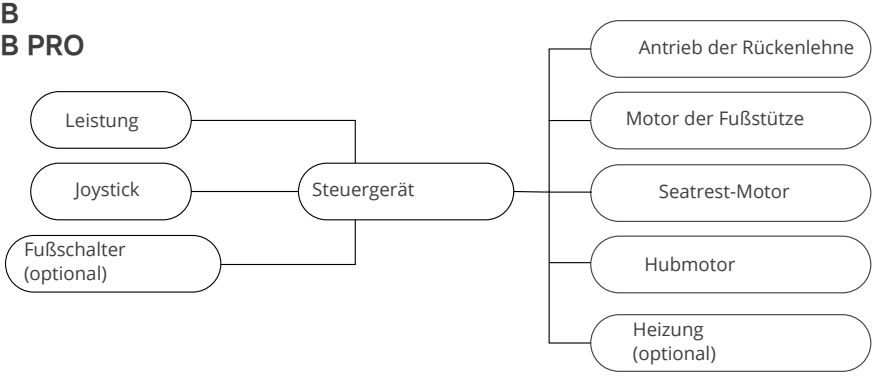

Das Steuergerät


Je nach Modell lassen sich bei diesem Gerät die Neigung der Rückenlehne, die Neigung des Sitzkissens und die Höhe verstellen. Es handelt sich um eine einteilige Konstruktion. (Wie auf dem Bild zu sehen)

2296

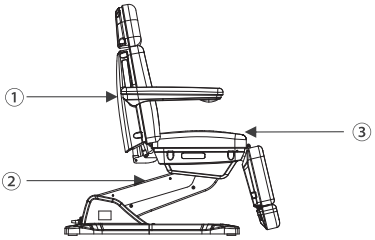

① Verstellung der Rückenlehnenneigung
② Einstellung des Hubs
③ Neigungsverstellung des Sitzes
④ Einstellung des Winkels der Fußstütze (Manuelle Einstellung)

2296B / 2296B PRO

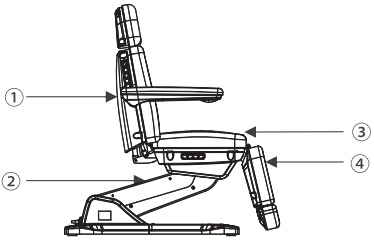


① Verstellung der Rückenlehnenneigung
② Einstellung des Hubs
③ Neigungsverstellung des Sitzes
④ Einstellung des Winkels der Fußstütze


6. Gebrauchsanweisung

2296


1.Standardkonfiguration (Controller)

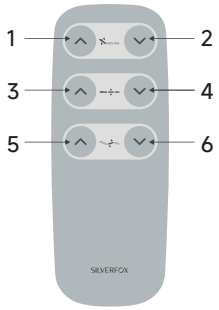

2.Optionale Konfiguration (Controller)

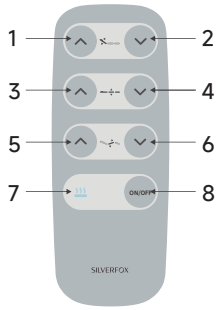


3. Optionale Ausstattung (Fußschalter)

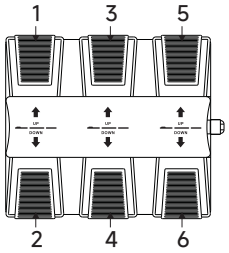


No.	Beschreibung	Funktionsweise
1/2	Ordner nach OBEN oder nach UNTEN	Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um den Sessel zu bewegen. Die Bewegung stoppt, wenn…Sie die Taste loslassen; die maximale oder minimale Position erreicht ist.
3/4	Sessellift: hochfahren oder hinunter-fahren	
5/6	Nach OBEN oder nach UNTEN neigen	
7	Kontrollleuchte für die Heizfunktion	Durch Drücken der Taste wird das Licht eingeschaltet und die Heizfunktion aktiviert; durch erneutes Drücken der Taste wird das Licht ausgeschaltet und die Heizfunktion deaktiviert.
8	Heizknopf (optional)	

2296B


1. Standardkonfiguration (Controller)

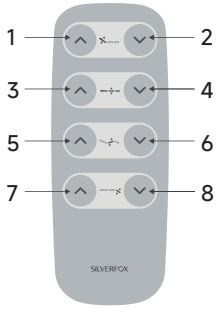

2. Optionale Konfiguration (Controller)

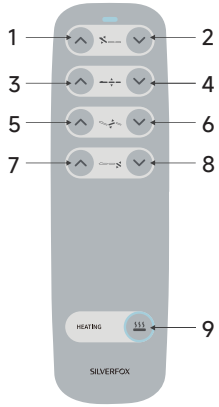


3. Optionale Ausstattung (Fußschalter)

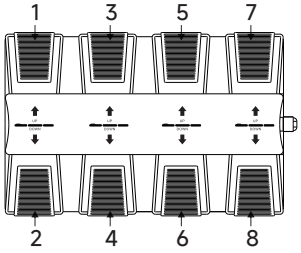


No.	Beschreibung	Funktionsweise
1/2	Ordner nach OBEN oder nach UNTEN	Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um den Sessel zu bewegen. Die Bewegung stoppt, wenn… Sie die Taste loslassen. Die maximale oder minimale Position erreicht ist.
3/4	Télésiège : monter ou descendre	
5/6	Nach OBEN oder nach UNTEN neigen	
7/8	Fuß nach OBEN oder nach UNTEN	
9	Heizknopf (optional)	Durch Drücken der Taste wird das Licht eingeschaltet und die Heizfunktion aktiviert; durch erneutes Drücken der Taste wird das Licht ausgeschaltet und die Heizfunktion deaktiviert.

2296B PRO


1.Standardkonfiguration (Controller)

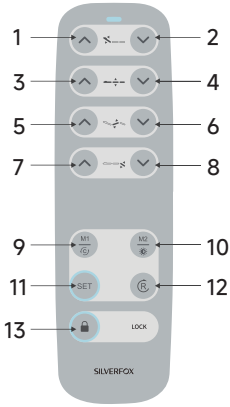



2.Optionale Konfiguration (Controller)

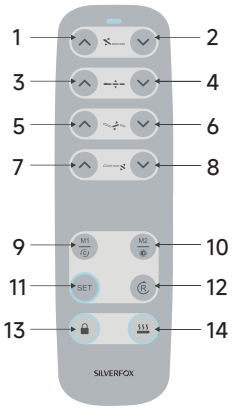

3. Optionale Ausstattung (Fußschalter)

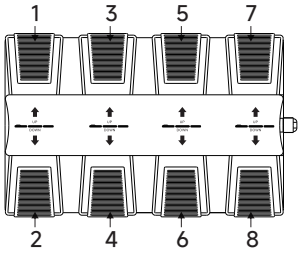

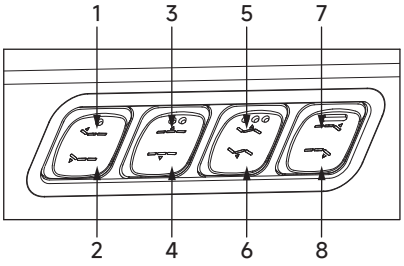

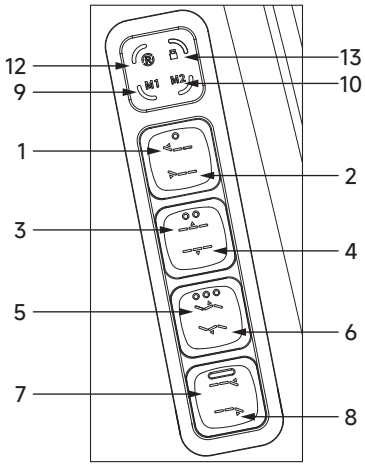

No.	Beschreibung	Fonctionnement
1/2	Ordner nach OBEN oder nach UNTEN	Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um den Sessel zu bewegen. Die Bewegung stoppt, wenn… Sie die Taste loslassen. Die maximale oder minimale Position erreicht ist.
3/4	Télésiège : monter ou descendre	
5/6	Nach OBEN oder nach UNTEN neigen	
7/8	Fuß nach OBEN oder nach UNTEN	
9/10 Oberer Teil Abschnitt	 Speicherfunktion Programmierung der Sesselpositionen	Mit der Programmierfunktion können Sie zwei häufig genutzte Positionen des Sessels ganz einfach über die Tasten M1 und M2 abrufen. - Stellen Sie den Sessel in die gewünschte Position ein. - Drücken Sie die Taste „M1“ oder „M2“ (an der Rückenlehne oder auf der Fernbedienung) und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Piepton und die Position wird unter „M1“ oder „M2“ gespeichert. So rufen Sie eine gespeicherte Position auf… - Drücken Sie die Taste der gewünschten Position „M1“ oder „M2“ Die Bewegung stoppt, wenn… - die gespeicherte Position erreicht ist - eine beliebige Taste gedrückt wird (an der Rückenlehne, der Sitzfläche, dem Fußschalter oder der Fernbedienung)
9/10 Unterer Tei 11	 Umgebungslicht	Es gibt 14 Beleuchtungsmodi und 12 Helligkeitsstufen. Drücken Sie kurz die Taste „SET“. Die „SET“-Anzeige blinkt, was anzeigt, dass Sie sich im Einstellungsmodus für das Lichtband befinden. Drücken Sie kurz erneut die Taste „SET“ oder lassen Sie die Tasten des Lichtbands länger als 10 Sekunden unberührt, um diesen Modus zu verlassen. Wenn das Lichtband ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz „M1“, um es einzuschalten. Wenn das Lichtband eingeschaltet ist: - Halten Sie „M1“ gedrückt, um das Lichtband auszuschalten. - Drücken Sie kurz auf „M1“, um zwischen den Beleuchtungsmodi zu wechseln: 1. Modi mit fester Farbe: Weiß, Rot, Grün, Blau, Rot + Grün, Rot + Blau 2. Einfarbige Überblendmodi: Weißer Überblend, roter Überblend, grüner Überblend, blauer Überblend 3. Einfarbige Blinkmodi: Weißes Blinken, rotes Blinken, grünes Blinken, blaues Blinken 4. Lichter aus Mit der Taste „M2“ lässt sich die Helligkeit des Lichtbands in insgesamt 12 Stufen einstellen. Die Helligkeit kann von schwach nach stark oder von stark nach schwach eingestellt werden. Wenn die minimale oder maximale Stufe erreicht ist, blinkt das Lichtband zweimal, um dies anzuzeigen, und kehrt dann die Einstellrichtung um. Sowohl kurze als auch lange Tastendrücke werden unterstützt.


12	Zurücksetzen	Unabhängig von der aktuellen Position drücken Sie die Taste „Reset“ (an der Rückenlehne, der Sitzfläche oder der Fernbedienung) … - Der Sessel fährt automatisch in die Einstiegsposition, damit Ihr Patient sich hinsetzen oder aufstehen kann. Die Rückenlehne wird in die aufrechte Position gebracht; die Neigung des Sessels wird in die flache Position gebracht; die Höhe des Sessels wird auf das Minimum eingestellt; die Fußstütze wird maximal abgesenkt Die Bewegung stoppt, wenn… - die Einstiegsposition erreicht ist - eine beliebige Taste gedrückt wird (an der Rückenlehne, der Sitzfläche, dem Fußpedal oder der Fernbedienung) *Hinweis: Um Schäden am Sessel zu vermeiden, wird die Rücksetz-funktion deaktiviert, wenn die Fußstütze ausgefahren ist. Stellen Sie vor der Verwendung der Rücksetzfunktion sicher, dass die Fußstützenverlängerung eingefahren ist und fest an der Fußstütze anliegt. In diesem Zustand ist die Sicherheitsvorrichtung der Verlängerung aktiviert, und die Rücksetzfunktion wird wirksam.
13	Sperren	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sperrfunktion zu aktivieren. Sobald der Sperrmodus aktiviert ist, sind alle anderen Tasten deaktiviert und die Motoren laufen nicht mehr. Halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sperrfunktion zu deaktivieren.
14	Heizknopf (optional)	Wenn Sie die Taste drücken, geht das Licht an und die Heizfunktion wird eingeschaltet; wenn Sie die Taste erneut drücken, geht das Licht aus und die Heizfunktion wird ausgeschaltet.


Hinweise:
1. Die Heizfunktion ist nur bei Modellen verfügbar, die mit dieser Funktion ausgestattetsind.
2. Je nach Konfiguration sollten geeignete Fernbedienungen ausgewählt werden.


7. Technische Daten

Leistung	100-120V～ or 220-240V～ ,50/60Hz
Maximale Leistung	300W
Raumtemperatur	0°C ~ + 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	30% ~ 90%
Nenn-Hubkraft	200kg
Lieferumfang	2296 :1500 × 620 × 615 mm 2296B / 2296B PRO:1370 × 620 × 615 mm

2296 / 2296B / 2296B PRO
Unit: mm

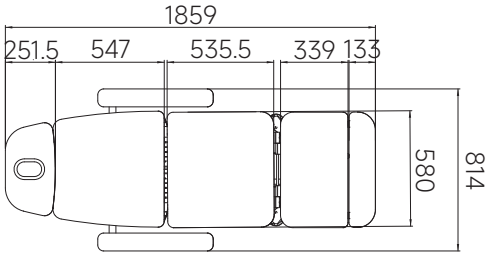

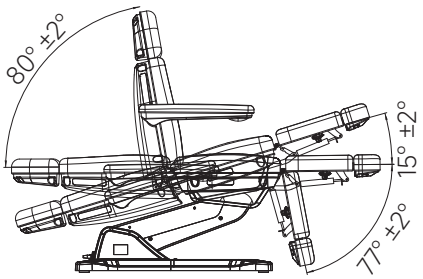

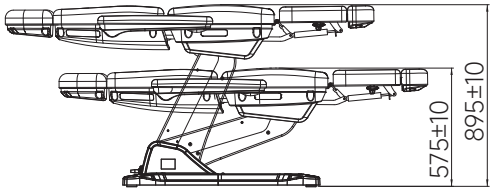

8. Wartung

1. Bitte verwenden Sie nach jeder Behandlung ausschließlich eine neutrale Lösung, um Staub und Flecken von Leder, Metallteilen oder anderen Bauteilen zu entfernen. Die Verwendung von Desinfektionsmitteln wie Alkohol, sauren oder alkalischen Lösungen ist untersagt. Diese Vorsichtsmaßnahme dient dazu, eine Verkürzung der Lebensdauer der Bauteile zu vermeiden.
2. Bitte schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig (einmal pro Jahr).
3. Sollte die Kopfstütze klemmen, können Sie dies durch Auftragen von Schmieröl beheben.

9. Fehlerbehebung

Das Phänomen der Verwerfung	Grund	Lösung
Der Motor funktioniert nicht ordnungsgemäß	1. Das Netzkabel ist nicht angeschlossen oder nicht richtig eingesteckt.	1. Schließen Sie das Netzkabel an oder stecken Sie den Stecker fest ein.
	2. Mangelhafte Qualität des Hand- oder Fußschalters.	2. Ersetzen Sie die Handsteuerung oder die Fußsteuerung.
	3. Mangelhafte Qualität des Schaltkastens.	3. Bitte wenden Sie sich zur Fehlerbehebung an den Kundendienst oder den Lieferanten.
	4. Riss des motorischen Schwanzes.	
	5. Der Motor wurde beschädigt.	
Ungewöhnliches Geräusch	1. Den rotierenden Teilen fehlt es an Schmierstoff.	1. Schmieröl nachfüllen.
	2. An beweglichen Stellen (wie Scharnieren,POM-Sets, Gasdruckfedern) fehlt es anSchmieröl.	2. Schmieröl nachfüllen.
	3. Probleme mit der Motorqualität.	3. Ersetzen Sie den Motor.

Sollte das Problem nach Durchführung der oben genannten Schritte weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Lieferanten, um es zu beheben.

10. Entsorgung

Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um die richtige Entsorgungsmethode zu ermitteln.

11. Erläuterung der Symbole

	Siehe Bedienungsanleitung		Hersteller
	WEEE		CE
	Herstellungsdatum		Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Warnung		Reihe NO.
	Vor Regen schützen		Zerbrechlich, bitte vorsichtig behandeln
	Vor Sonnenlicht schützen		Stapelgrenze von 250 kg
	Nach oben		Kein Taumeln
	Sei vorsichtig		Kein Zusammenpressen

Die Maschine erfüllt die folgenden einschlägigen Bestimmungen:
Richtlinie 2006/42/EG
Richtlinie 2014/30/EU
Richtlinie 2014/35/EU
Richtlinie 2011/65/EU

SILVERFOX CORPORATION LIMITED
Adresse: NO.18, 1st TongLe Road, TangXia Town, PengJiang District, JiangMen City,
GuangDong Province, P.R. China.



In conformità con la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro dovesse aver bisogno di smaltire questo prodotto, NON gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Consegnare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE, ove disponibili.

▲ Die Produktkomponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Das tatsächliche Aussehen kann von den Abbildungen abweichen.

SILVERFOX

2296 Serie Poltrona per trattamenti viso

Benvenuti nel mondo del nostro prodotto.
Il produttore si riserva il diritto di apportare miglioramenti al design e di modificare il prodotto senza preavviso.
Versione A0

1. Informazioni sul presente manuale

Il presente manuale è da intendersi esclusivamente come riferimento per l'utilizzo di questo specifico modello. Qualora il manuale venisse utilizzato per altri scopi, non ci assumeremo alcuna responsabilità per le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono protette da copyright e non possono essere copiate o tradotte in alcuna parte del presente documento senza il consenso scritto della nostra azienda SILVERFOX.

2. Avviso

Rischi elettrici

- La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e dotata di messa a terra, per evitare il rischio di incendio e scossa elettrica.
- Il filo di terra nel cavo di alimentazione funge esclusivamente da messa a terra funzionale.
- Non collocare l'apparecchio in un luogo in cui sia difficile scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
- Prima di sostituire componenti elettrici o pulire l'apparecchiatura, è necessario scollegare l'alimentazione.
- Non collocare l'apparecchio in luoghi umidi, come i bagni, per evitare scosse elettriche o altri malfunzionamenti; tenere il telecomando e l'unità di controllo lontani dall'acqua.
- Se la spina è danneggiata, rivolgersi al rivenditore, al centro assistenza o a personale qualificato e con esperienza per la riparazione, al fine di evitare pericoli.

Rischio meccanico

- Non salire su questa attrezzatura.
- Non consentire ai bambini di utilizzare o giocare con l'apparecchiatura, né di riporla o lasciarla alla loro portata.
- La portata massima di questa sedia è di 200 kg. Il superamento della portata massima può comportare rischi per la sicurezza.

Controlli ambientali

- Si prega di non collocare né utilizzare l'apparecchiatura in luoghi in cui si effettuano lavori di verniciatura c o rivestimento o in cui viene erogato ossigeno.
- Protezione contro le scosse elettriche: Classe I
- ⌂Solo per uso interno

Protocollo operativo

- Dopo l'uso, si prega di stendere il rivestimento in modo che sia perfettamente disteso.
- L'apparecchiatura deve essere utilizzata da personale qualificato che ne conosca la struttura, le prestazioni e le istruzioni per l'uso e che provveda alla sua manutenzione periodica.
- "L'attrezzatura non deve essere utilizzata da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte che non dispongano di adeguata esperienza o conoscenza, a meno che non siano sotto costante supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sul suo corretto utilizzo da parte di una persona qualificata responsabile della loro sicurezza." AVVERTENZA: durante il funzionamento dell'apparecchiatura, assicurarsi che l'area di movimento sia libera da ostacoli per evitare rischi di schiacciamento o intrappolamento.

Cessione e modifica

- Non è consentito apportare alcuna modifica a questo dispositivo.
- Al termine della loro vita utile, le apparecchiature e gli accessori devono essere smaltiti in conformità conc le normative locali.

3. Precauzioni


Protocollo di manutenzione

- Non effettuare riparazioni o interventi di manutenzione su questo dispositivo durante le operazioni c di trattamento.
- IQualora l'utente e/o il paziente venga a conoscenza di un incidente grave correlato a questa apparecchiatura, è necessario segnalarlo alle autorità competenti del proprio paese e al produttore.
- Serrare regolarmente bulloni e dadi per evitare malfunzionamenti causati da componenti allentati, slittamenti, vibrazioni e cadute.
- Durante gli interventi di manutenzione, gli operatori non devono smontare alcun componente della sedia. Non utilizzare questo prodotto in caso di malfunzionamento. Se si riscontrano fenomeni o rumori anomali, interrompere immediatamente il funzionamento e ispezionare l'apparecchio. Il funzionamento può essere ripreso solo dopo aver risolto il malfunzionamento.
- La manutenzione deve essere eseguita da professionisti qualificati.

- Dopo ogni trattamento, utilizzare una soluzione neutra per rimuovere polvere e macchie dalla pelle.
  Le sostituzioni devono essere eseguite da professionisti qualificati. La nostra azienda è in grado di fornire schemi elettrici, guide alla risoluzione dei problemi o altro materiale utile per la manutenzione, a uso esclusivo dei professionisti.


Protocollo operativo

- Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'installazione, dell'uso e della regolazione e c di conservarlo in un luogo sicuro.
- Rispettare le procedure operative di sicurezza, non sovraccaricare il tavolo, assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano completi e affidabili ed eliminare tempestivamente qualsiasi condizione di pericolo.
- Utilizzare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle avvertenze riportate sulle etichette apposte sul prodotto. Per regolare l'altezza complessiva della sedia, è necessario tenere premuto il pulsante fino a quando la sedia non raggiunge la posizione desiderata.
- Evitare di caricare il peso su un unico punto. (Distribuire il peso in modo uniforme)
- Ciclo di funzionamento del motore: ≤2 minuti in funzione / ≥18 minuti a riposo. (Il motore è progettato per funzionare per un massimo di 2 minuti, seguiti da un periodo di riposo di almeno 18 minuti)
- Durante la regolazione di ciascun componente, tenere mani, piedi e testa lontani dalle punte delle frecce indicate nell'immagine qui sotto.

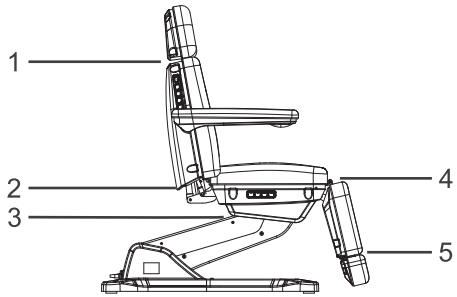

4. Installazione

- Aprire la confezione e controllare il prodotto per assicurarsi che sia in buone condizioni e che siano presenti tutti gli accessori e i pezzi di ricambio. In caso di domande, contattare il proprio rivenditore.
- Posizionare il prodotto in un punto della stanza asciutto, pulito e adatto al trattamento, lasciando ampio spazio intorno all'apparecchio per consentirne il corretto funzionamento. Assicurarsi che il pavimento sia in piano. Se il pavimento è irregolare, ruotare i piedini in gomma per compensare eventuali irregolarità e garantire la stabilità.
- Nota: non sono necessarie viti aggiuntive per fissare il tavolo al pavimento.
- Collegare correttamente la spina del prodotto alla presa di corrente (come mostrato nell'immagine).

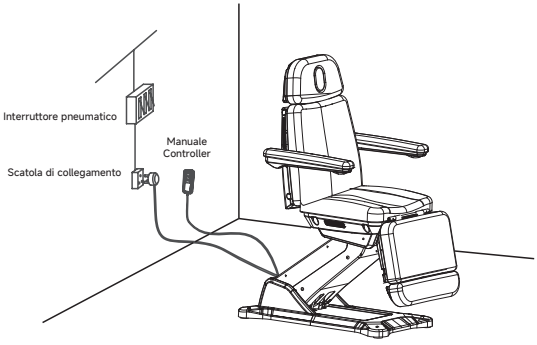

5. Struttura dei prodotti


Questo dispositivo è composto da una centralina, un motore, elementi metallici, componenti in plastica e pelle.

Descrizione della funzione


Lettino da bellezza elettrico, azionato da un sistema motorizzato interno che garantisce un posizionamento Cpreciso e regolabile. Progettato per offrire un supporto stabile ai clienti durante i vari trattamenti di bellezza e cura della pelle.

Schema del sistema circuitale

2296

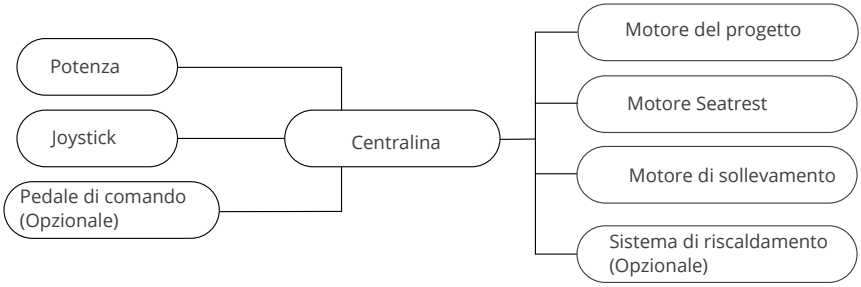


2296B
2296B PRO

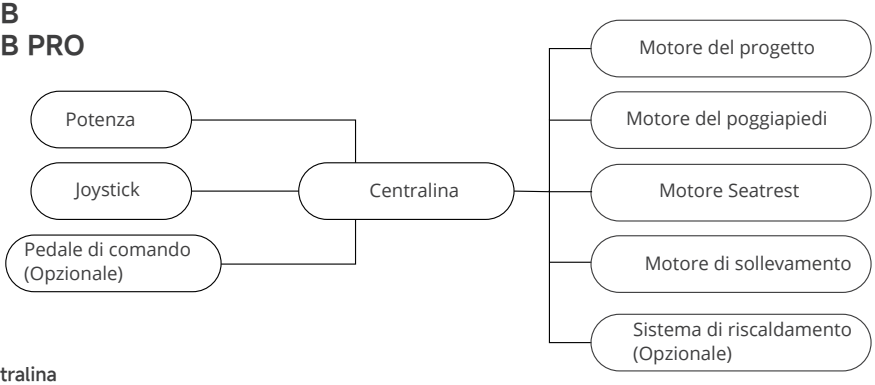

La centralina


A seconda del modello, questo dispositivo è dotato di regolazione dell'inclinazione dello schienale, regolazione dell'inclinazione del cuscino del sedile e regolazione dell'altezza. Si tratta di una struttura monoblocco. (Come mostrato in foto)

2296

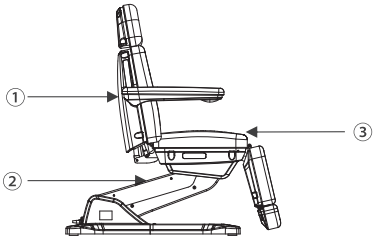

① regolazione dell'inclinazione dello schienale
② regolazione del sollevamento
③ regolazione dell'inclinazione del sedile
④ Regolazione dell'inclinazione del poggiapiedi (Regolazione manuale)

2296B / 2296B PRO

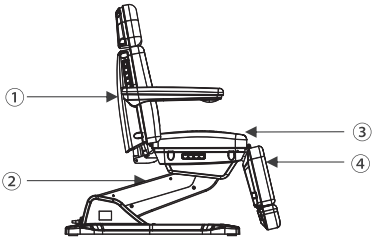


① regolazione dell'inclinazione dello schienale
② regolazione del sollevamento
③ regolazione dell'inclinazione del sedile
④ regolazione dell'inclinazione del poggiapiedi


6. Istruzioni per l'uso

2296


1.Configurazione standard
(Comando manuale)

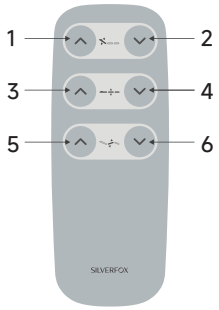

2.Configurazione opzionale
(Comando manuale)

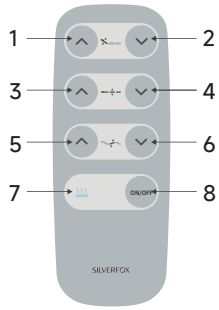


3. Configurazione opzionale
(Pedaliera)

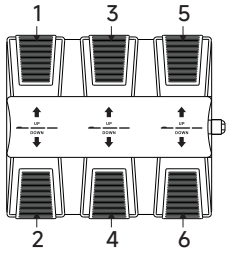


No.	Descrizione	Funzionamento
1/2	Schienale SU o GIÙ	Tenere premuto il pulsante corrispondente per spostare la sedia Il movimento si interrompe quando… Si rilascia il pulsante Si raggiunge la posizione massima o minima.
3/4	Seggiovia: SU o GIÙ	
5/6	Inclina verso l'alto o verso il basso	
7	Spia luminosa della funzione di riscaldamento	Premendo il pulsante, la luce si accende e la funzione di riscaldamento si attiva; premendo nuovamente il pulsante, la luce si spegne e la funzione di riscaldamento si disattiva.
8	Pulsante di riscaldamento (opzionale)	

2296B


1.Configurazione standard
(Comando manuale)

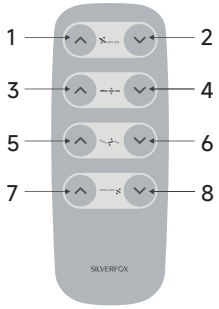

2.Configurazione opzionale
(Comando manuale)

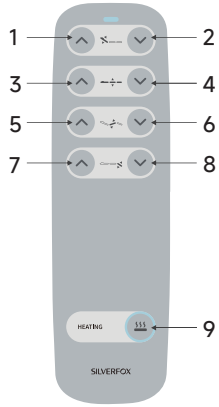


3. Configurazione opzionale
(Pedaliera)

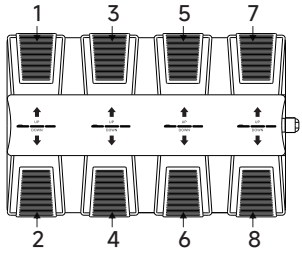


No.	Descrizione	Funzionamento
1/2	Schienale SU o GIÙ	Tenere premuto il pulsante corrispondente per spostare la sediall movimento si interrompe quando… Si rilascia il pulsante Si raggiunge la posizione massima o minima.
3/4	Seggiovia: su o giù	
5/6	Inclina verso l'alto o verso il basso	
7/8	Piede in alto o in basso	
9	Pulsante di riscaldamento (Opzionale)	Premendo il pulsante, la luce si accende e la funzione di riscaldamento si attiva; premendo nuovamente il pulsante, la luce si spegne e la funzione di riscaldamento si disattiva.

2296B PRO


1.Configurazione standard (Comando manuale)

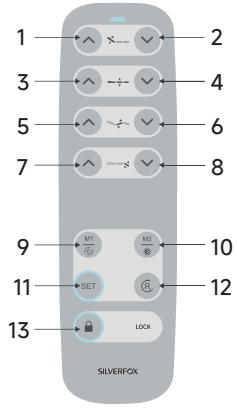



2.Configurazione opzionale (Comando manuale)

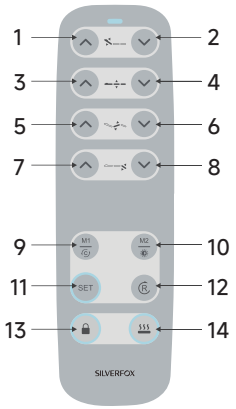

3. Configurazione opzionale (Pedaliera)

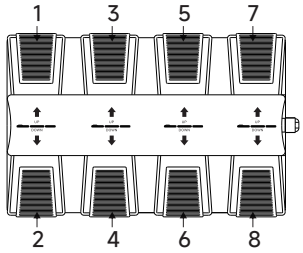

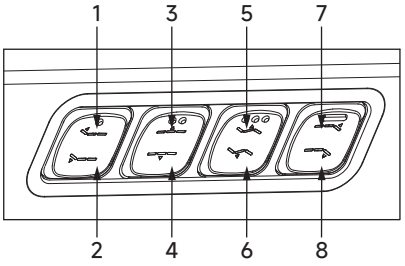

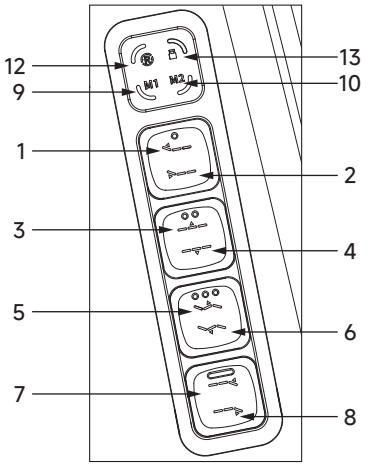

No.	Descrizione	Funzionamento
1/2	Schienale SU o GIÙ	Tenere premuto il pulsante corrispondente per spostare la sedia Il movimento si interrompe quando… Si rilascia il pulsante Si raggiunge la posizione massima/minima.
3/4	Seggiovia: su o giù	
5/6	Inclina verso l'alto o verso il basso	
7/8	Piede in alto o in basso	
9/10 Parte superiore Sezione	 Funzione di memoria Programmazione delle posizioni della poltrona	La funzione di programmazione consente di richiamare facilmente due posizioni della poltrona utilizzate di frequente tramite i pulsanti M1 e M2. -Regolare la poltrona nella posizione desiderata -Tenere premuto il pulsante "M1" o "M2" (sul poggiatesta o sul telecomando) per 3 secondi. Si sentirà un segnale acustico e la posizione verrà impostata su "M1" o "M2". Per richiamare una posizione programmata… -Premere il pulsante della posizione desiderata “M1” o “M2” Il movimento si arresta quando… -Viene raggiunta la posizione programmata -Viene premuto un pulsante qualsiasi (sul poggiatesta, sul poggiabraccia, sul pedale o sul telecomando manuale)
9/10 Parte inferiore Sezione 11	 Luce ambientale	Sono disponibili 14 modalità di illuminazione e 12 livelli di luminosità. Premere brevemente il pulsante “SET”. L'indicatore “SET” lampeggerà, segnalando l'accesso alla modalità di controllo della striscia luminosa. Premere brevemente di nuovo il pulsante “SET”, oppure lasciare i pulsanti della striscia luminosa inattivi per più di 10 secondi, per uscire dalla modalità. Quando la striscia luminosa è spenta, premere brevemente “M1” per accenderla. Quando la striscia luminosa è accesa: -Premere a lungo “M1” per spegnere la striscia luminosa. -Premere brevemente “M1” per passare da una modalità di illuminazione all'altra: 1. Modalità a colore fisso: Bianco, Rosso, Verde, Blu, Rosso + Verde, Rosso + Blu 2. Modalità dissolvenza a colore singolo: Dissolvenza bianca, Dissolvenza rossa, Dissolvenza verde, Dissolvenza blu 3. Modalità lampeggiante a colore singolo: Lampeggiante bianco, Lampeggiante rosso, Lampeggiante verde, Lampeggiante blu 4. Luci spente “M2” serve per regolare la luminosità della striscia luminosa, con un totale di 12 livelli. La luminosità può essere regolata da bassa a alta o da alta a bassa. Quando si raggiunge il livello minimo o massimo, la striscia luminosa lampeggerà due volte come segnale, quindi invertirà la direzione di regolazione. Sono supportate sia le operazioni di pressione breve che quelle di pressione prolungata.

12	Reimposta	Da qualsiasi posizione, premere il pulsante “Reset” (sul schienale, sul sedile o sul telecomando) … -La poltrona si sposta automaticamente nella posizione di accesso in modo che il paziente possa sedersi o alzarsi dalla poltrona. Lo schienale si porta in posizione verticale L'inclinazione della poltrona si porta in posizione piana L'altezza della poltrona si porta al minimo il poggiapiedi si abbassa al massimo Il movimento si arresta quando… -Viene raggiunta la posizione di accesso -Viene premuto un pulsante qualsiasi (sullo schienale, sul sedile, sul pedale o sul telecomando manuale) *Nota: Per evitare di danneggiare la poltrona, la funzione di reset sarà disabilitata quando il poggiapiedi è esteso. Prima di utilizzare la funzione di reset, assicurarsi che l'estensione del poggiapiedi sia retratta e premuta saldamente contro il poggiapiedi. A questo punto, l'interruttore di sicurezza del dispositivo di estensione viene attivato e la funzione di reset avrà effetto.
13	Blocco	Tenere premuto per 3 secondi per attivare la funzione di blocco. Quando la modalità di blocco è attiva, tutti gli altri pulsanti sono disabilitati e i motori non funzionano. Tenere premuto nuovamente per 3 secondi per disattivare la funzione di blocco.
14	Pulsante di riscaldamento (Opzionale)	Premendo il pulsante, la luce si accende e la funzione di riscaldamento si attiva; premendo nuovamente il pulsante, la luce si spegne e la funzione di riscaldamento si disattiva.


Note:
1. La funzione di riscaldamento è disponibile solo sui modelli dotati di tale funzione.
2. È necessario scegliere i telecomandi in base alla configurazione specifica.


7. Parametri tecnici


Potenza	100-120V～ or 220-240V～ ,50/60Hz
Potenza massima	300W
Temperatura ambiente	0°C ~ + 40°C
Umidità relativa	30% ~ 90%
Carico nominale di sollevamento	200kg
Dimensioni della confezione	2296 :1500 × 620 × 615 mm 2296B / 2296B PRO:1370 × 620 × 615 mm

2296 / 2296B / 2296B PRO

Unit: mm

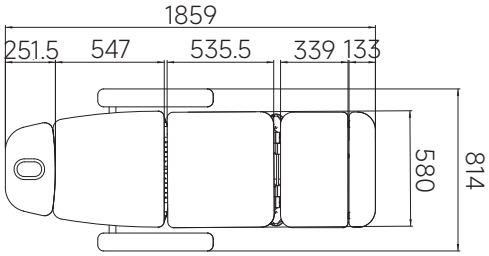

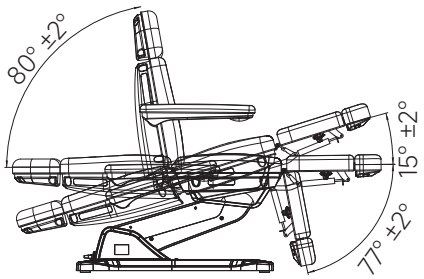

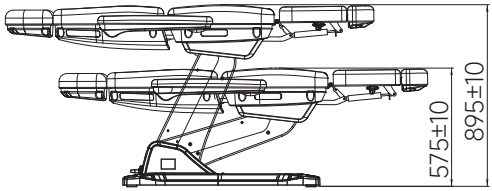

8. Manutenzione

1. Dopo ogni trattamento, si prega di utilizzare esclusivamente una soluzione neutra per rimuovere polvere e macchie dalla pelle, dalle parti metalliche o da altri componenti. È vietato l'uso di soluzioni disinfettanti quali alcol, acidi o soluzioni alcaline, al fine di evitare di ridurre la durata dei componenti.
2. Si prega di lubrificare regolarmente le parti mobili (una volta all'anno).
3. Se il poggiatesta si blocca, è possibile risolvere il problema applicando dell'olio lubrificante.

9. Risoluzione dei problemi

Il fenomeno del guasto	Motivo	Soluzione
Il motore non funziona correttamente	1. Il cavo di alimentazione non è collegato o non è inserito correttamente.	1. Collegare il cavo di alimentazione o inserirlo bene nella presa.
	2. Scarsa qualità del comando manuale o del comando a pedale.	2. Sostituire il comando manuale o quello a pedale.
	3. Scarsa qualità della centralina.	3. Si prega di contattare il centro di assistenza o il fornitore per la risoluzione dei problemi.
	4. Rottura della coda motrice.	
	5. Il motore era danneggiato.	
Rumore anomalo	1. Le parti rotanti sono a corto di olio lubrificante.	1. Aggiungere olio lubrificante.
	2. I punti di rotazione (come cerniere, set in POM, pistoni a gas) presentano una carenza di olio lubrificante.	2. Aggiungere olio lubrificante.
	3. Problemi relativi alla qualità del motore.	3. Sostituire il motore.

Se il problema persiste dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, si prega di contattare il centro di assistenza o il fornitore per risolverlo.

10. Smaltimento

Contattare le autorità locali per stabilire il metodo di smaltimento corretto.

11. Spiegazione dei simboli

	Consultare il manuale di istruzioni		Produttore
	WEEE		CE
	Data di produzione		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Avviso		Serie NO.
	Proteggere dalla pioggia		Fragile, maneggiare con cura
	Tenere lontano dalla luce solare		Limite di impilabilità in base al peso: 250 kg
	Verso l'alto		Non capovolgere
	Fai attenzione		Senza chiusura

La macchina è conforme alle seguenti disposizioni applicabili:
Direttiva 2006/42/CE
Direttiva 2014/30/UE
Direttiva 2014/35/UE
Direttiva 2011/65/UE

SILVERFOX CORPORATION LIMITED
Adresse: NO.18, 1st TongLe Road, TangXia Town, PengJiang District, JiangMen City, GuangDong Province, P.R. China.



In conformità con la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro dovesse aver bisogno di smaltire questo prodotto, NON gettarlo insieme ai rifiuti domestici. Consegnare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE, ove disponibili.

▲ Le caratteristiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. L'aspetto effettivo può differire da quello illustrato nelle immagini.