Oxivir Sporicide CE

Detergente desinfectante de amplio espectro

Descripción

Diversey Oxivir Sporicide es un limpiador desinfectante listo para usar en un solo paso efectivo, entre otros, frente a Clostridium difficile y Bacillus subtilis. Basado en la formulación de Peróxido de Hidrógenos Acelerado patentado por Diversey, el Oxivir Sporicide se puede usar en dispositivos médicos duros y no invasivos.

Propiedades

- Efectivo frente a **C difficile** en 1 minuto*
- Esporicida, Bactericida, Virucida, Levuricida, Fungicida, en tan sólo 1 minuto
- Perfil de seguridad de usuario y superficies positivo, en comparación con otros esporicidas
- Limpiador eficaz
- Sin perfume
- Se descompone en agua y oxígeno - No deja residuos activos tras su aplicación
- No contiene cloro o alcohol

Beneficios

- Excelente respuesta frente a brotes de **C difficile**
- Amplia eficacia frente a todas las otras clases de patógenos, proporcionando un alto nivel de protección en los pacientes.
- Tiempos reducidos de contacto que garantizan la eficacia del desinfectante.
- No produce irritación de las vías respiratorias.
- Adecuado para uso en áreas de alto riesgo en el cuidado de la salud, incluidos quirófanos, UCIs, UVIs y todo tipo de habitaciones de pacientes.
- Su botella con cabezal espumante permite una aplicación eficiente. No está adecuado para usar en dispositivos médicos invasivos.

Modo de empleo

Limpieza con Pulverizador y desinfección:

- Eliminar la suciedad gruesa.
- Aplicar en las superficies, en una bayeta limpia y pasar la bayeta por la superficie o aplicar directamente sobre la superficie presionando el gatillo del cabezal espumante.
- Pasado el tiempo necesario de contacto**, aclarar y dejar secar al aire.

Sistema de bayetas desechables Dry Wipes:


- Prepare un cubo de Dry Wipes siguiendo las instrucciones.
- Eliminar la suciedad gruesa.
- Cortar una bayeta y seguir el mismo procedimiento anterior.
- Pasado el tiempo necesario de contacto**, aclarar y dejar secar al aire.
- Cambiar la bayeta cuando esté visiblemente sucia o cuando cambie de área de limpieza.

*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey. *Cuando se aplica como desinfectante final con un paso previo de limpieza.
**Necesario asegurar que el producto actúa durante el tiempo necesario de contacto.

CE 0044

AHP®

Diversey Europe Operations B.V.
Maarssenbroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands

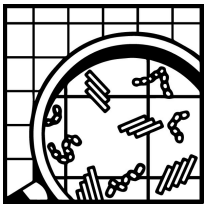



© A.I.S.E

Oxivir Sporicide CE

Información técnica

Apariencia:	Transparente Incoloro Líquido
pH (en uso):	2.7 ± 0.3
Densidad Relativa (g/cm^3; 20°C):	1.03265
Caducidad:	720 días

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

No mezclar con otros productos químicos. No usar sobre superficies sensibles al agua o a productos ácidos. Utilizado bajo las recomendaciones de uso de Diversey Oxivir Sporicide es adecuado para la mayoría de materiales comunes.

Información microbiológica

Eficacia probada cumpliendo las normas europeas: EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348, EN16615.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 29/11/2022 es-ES (K00403)